

tria®

لیزر جوانساز پوست تریا بیوتی

کتابچه‌ی راهنما

خوش آمدید

سفر خود را برای داشتن پوستی جوان با تریا بیوتی آغاز کنید. از نتایج تخصصی آن، شامل کاهش چین و چروک پوست در خانه برخوردار گردید.

با لیزر جوانساز تریا می‌توانید آثار متعدد پیری را درمان کنید، و درخشش طبیعی پوست را به آن بازگردانید. دستگاهی که در اختیار دارید یک انقلاب حقیقی در امر مراقبت شخصی پوست است که با درمان‌های روزانه‌ی کوتاه و ساده می‌تواند نتایج تخصصی کاهش چین و چروک پوست را در محیط آرام و امن خانه‌ی خودتان برای شما به ارمغان بیاورد.

پوست جوان سرشار و غنی از کلاژن است، که باعث سرزندگی پوست شده از سلامت آن پشتیبانی می‌کند. با گذشت زمان، بدن کلاژن کمتری تولید می‌کند، و در اثر قرار گرفتن در برابر تابش نور خورشید رشد کلاژن‌های جدید کندتر می‌گردد. این امر می‌تواند به پیدا شدن چین و چروک روی پوست منجر شود، به ویژه در اطراف چشم‌ها. پرتو لیزر می‌تواند فرایند تجدید کلاژن طبیعی خود پوست را به کار بیندازد و از این راه رشد سلول‌های پوستی جدید را تسریع نماید تا از خطوط نازک روی پوست کاسته شده، پوستی صاف‌تر و هموارتر ایجاد گردد.

اکنون شما صاحب همان تکنولوژی هستید که درماتولوژیست‌ها سال‌هاست از آن استفاده می‌کنند و می‌توانید تنها در دو هفته شاهد نتایج ملموس آن باشید.

لطفاً پیش از شروع به کار، برای اطلاعات مهم مربوط به ایمنی و اطمینان از حصول بهترین نتایج دستورالعمل‌هایی را که در این کتابچه‌ی راهنما آمده است به دقت مطالعه نمایید و ویدئوهای مربوط به نحوه‌ی استفاده از لیزر جوانساز را که بر روی سایت ما قابل دسترس هستند تماشا نمایید.

آشنایی با لیزر جوانساز تریا

محتویات بسته‌ی تریا:

دستگاه لیزر جوانساز تریا بیوتی

پایه‌ی نگهدارنده‌ی شارژ

کابل و مبدل برق

کتابچه‌ی راهنما
راهنمای استفاده‌ی سریع

ویژگی‌های مهم:

نمایشگر

دریچه‌ی درمان لیزر

در طول درمان پرتو

لیزر را ساطع می‌کند

چراغ تماس

هنگام تماس و حرکت

روی پوست، به رنگ

ارغوانی می‌درخشد

پایه‌ی نگهدارنده‌ی شارژ

لیزر را نگه می‌دارد و

آن را شارژ می‌کند


کابل و مبدل برق

پایه‌ی نگهدارنده‌ی

شارژ را به پریز برق

متصل می‌کند

لیزر جوانساز پوست تریابیوتی

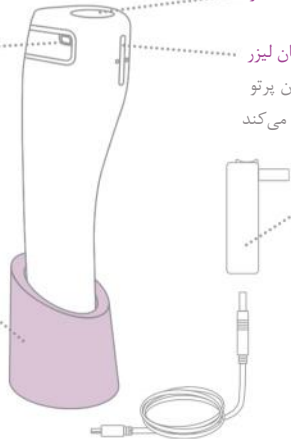

نمایشگر

نشانگر قفل دستگاه

اگر دستگاه قفل باشد روشن می شود، اگر قفل دستگاه باز باشد، خاموش می گردد

نشانگر تکمیل درمان

هنگامی که درمان کامل شود، روشن می گردد

دکمه ی پاور

دستگاه را خاموش / روشن کرده و سطح درمان را تنظیم می کند

نشانگر خطای دستگاه


در صورت بروز خطا یا نقص در دستگاه روشن می شود

نشانگر سطح درمان

سطح درمان انتخاب شده را نشان می دهد

نشانگر باتری

روشن: شارژ باتری کم
چشمکزن: در حال شارژ
خاموش: تکمیل شارژ

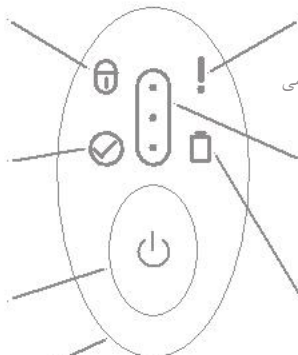

ویژگی قفل دستگاه

وقتی دستگاه قفل باشد، کار نمی کند. هنگامی که دکمه ی پاور را می فشارید آیکن آبی رنگ فقلی شکل روشن می گردد.

برای قفل کردن دستگاه: نخست، دستگاه لیزر جوانساز را روشن کنید. سپس دکمه ی پاور را برای چند ثانیه نگه دارید تا آیکن فقلی شکل روی نمایشگر روشن شود.

برای باز کردن قفل دستگاه: دکمه ی پاور را فشار داده، نگه دارید تا چهار صدای بوق را بشنوید. سپس انگشت خود را از روی دکمه ی پاور بردارید.



چه کسانی باید از لیزر جوانساز تریا استفاده کنند (موارد استفاده)

با علامت «مناسب برای استفاده» مشخص شده‌اند
بکار رود.

اگر مطمئن نیستید که لیزر جوانساز تریا برای شما
مناسب هست یا نه، از دستگاه خود استفاده نکنید،
تا هنگامی که با بخش پشتیبانی و امور مشتریان تریا
یا با یک متخصص پوست برای کسب اطلاعات بیشتر
تماس بگیرید.

لیزر جوانساز تریا برای درمان چین و چروک‌های
پیرامون چشم (پنجه‌های کلاغ) در نظر گرفته شده
که می‌تواند موجب صاف و هموارتر شدن پوست در
ناحیه درمان گردد.

برای اینکه ببینید آیا لیزر جوانساز تریا برای‌تان
مناسب است یا نه از این چارت استفاده کنید. این
لیزر می‌تواند برای درمان نوع پوست‌هایی که

چه زمانی نباید از لیزر جوانساز تریا استفاده (موارد منع استفاده)

اگر پوست‌تان دچار عفونت، سوختگی یا بریدگی
است از لیزر جوانساز تریا استفاده نکنید، زیرا این
کار موجب آزرده‌گی و تحریک آن ناحیه از پوست می
گردد. پیش از استفاده از لیزر، صبر کنید تا عفونت،
سوختگی یا بریدگی پوست‌تان کاملاً بر طرف گردد.

نمونه	استفاده از لیزر	توصیف	شرایط پوست
	✓ قابل استفاده	خطوط و چروک‌های اطراف چشم	چروک‌های دور چشم
	✓ قابل استفاده	جوش‌ها	سایر شرایط پوستی
	X از لیزر استفاده نکنید ممکن است روی رگه‌ها موثر نباشد	رگه دار شدن	ممکن است با لیزر جوانساز تریا شرایط پوستی دیگر، بجز چروک‌ها به نحو مؤثری درمان نشوند.
	✓ قابل استفاده	دیسکرومی	
	✓ قابل استفاده	لکه	

اطلاعات امنیتی مهم زیر را پیش از استفاده از دستگاه مطالعه کنید. در صورت داشتن هرگونه سوالی با مرکز خدمات پس از فروش تریا تماس بگیرید.

هشدارها

از لیزر برای درمان چشم یا پلک استفاده نکنید و آن را مستقیماً در مقابل چشمان خود قرار ندهید. این کار منجر به آسیب جدی به چشم، نظیر کاهش دائمی یا موقتی دید یا کوری دائمی، می‌گردد. اطراف چشم را تنها تا آن‌جا که استخوان زیر پوست را می‌توان حس کرد درمان کنید.

از لیزر روی پوست خالکوبی شده و یا نواحی دارای آرایش دائمی استفاده نکنید. این کار موجب آسیب به خالکوبی یا التهاب شدید پوست خواهد شد.

در طول هر ۲۴ ساعت، از لیزر جوانسازی تریا بیش از یک بار برای درمان هر ناحیه از صورت استفاده نکنید. انجام این کار موجب تحریک پوست خواهد شد.

پس از تکمیل دستگاه و خاموش شدن دستگاه بطور خودکار، برای شروع درمان بعدی حداقل ۲۴ ساعت صبر کنید. عدم رعایت این نکته موجب افزایش تحریکات پوستی می‌گردد.

از این دستگاه برای درمان افراد دارای کمتر از ۱۸ سال استفاده نکنید.

اگر باردار هستید از این دستگاه استفاده نکنید. این دستگاه هنوز روی زنان باردار آزمایش نشده است و خطرات احتمالی آن روی این افراد مورد مطالعه قرار نگرفته است.

در صورت مرطوب بودن دستگاه، از آن استفاده نکنید. اگر دستگاه یا شارژر آن در آب بیفتد، ابتدا آن را از پریز برق جدا کنید. لمس دستگاه در این حالت می‌تواند موجب شوک الکتریکی مرگ‌بار شود.

چنانچه درمان با لیزر جوانسازی تریا رنگ پوست شما را تیره می‌کند، از آن استفاده نکنید. عدم رعایت این هشدار، می‌تواند موجب تیرگی بیشتر پوست شود که بهبود آن تا مدت سه ماه به طول می‌انجامد.

از این دستگاه برای درمان پوست دردناک، ملتهب، کبود یا زخمی استفاده نکنید. این علائم ممکن است ناشی از شرایط وخیم و جدی پوستی باشد و لازم است توسط پزشک مورد معاینه و بررسی قرار گیرد.

اگر پوست شما دچار سرخی یا التهاب شدید شده است، تا زمان رفع این علائم از این دستگاه استفاده نکنید. اگر این مشکل بیش از یک هفته به طول

انجامید، از درمان با این دستگاه خودداری کنید و به یک پزشک متخصص پوست مراجعه نمایید.

نور لیزر نامرئی است. آن را بطور مستقیم با ابزارهای نوری مشاهده نمی‌آید.

احتیاط‌ها

از این دستگاه بجز صورت، روی سایر اعضای بدن استفاده نکنید. این کار هنوز آزمایش نشده است و خطرات احتمالی آن ناشناخته است.

این دستگاه تنها به صورت بالینی روی چروک های صورت مورد آزمایش قرار گرفته است. استفاده از آن روی چروک‌های سایر نواحی بدن ممکن است تأثیری بر بهبود آن‌چروک‌ها نداشته باشد.

درمان یک ناحیه بدون حرکت دادن دستگاه سبب افزایش تورم شده و ممکن است منجر به بروز تاول شود.

اگر بطور حرفه‌ای از درمان‌های زیبایی، نظیر لایه برداری، بازسازی سطحی، یا تزریق پرکننده استفاده می‌کنید، تا ترمیم کامل پوست خود از این دستگاه استفاده ننمایید.

حتماً دستگاه را در اتاق خشک و در دمای بین ۲۰- و ۵۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری نمایید.

دستگاه را روی سطوح سخت رها نکنید، زیرا این کار موجب آسیب رساندن به آن می‌گردد. استفاده از دستگاه آسیب دیده می‌تواند به بروز مشکلات پوستی یا چشمی منجر شود.

فقط از پایه‌ی شارژ و منبع برق خود دستگاه برای شارژ مجدد دستگاه استفاده کنید. بکارگیری تجهیزات دیگر می‌تواند به دستگاه آسیب وارد نماید.

برای بازکردن یا تعمیر دستگاه، پایه‌ی شارژ یا منبع برق آن تلاش نکنید.

مزایا و عوارض احتمالی

مزایا و خطرات احتمالی لیزر جوانسازی تریا در یک مطالعه بالینی روی ۶۰ شرکت‌کننده در سنین ۷۰-۳۲ سال آزمایش شده است. شرکت‌کنندگان ۵ روز در هفته به مدت ۱۲ هفته تحت درمان قرار گرفتند و از نظر بهبود در وضعیت پوست و عوارض جانبی مورد ارزیابی واقع شدند.

مزایا

بر اساس مطالعه‌ی بالینی، درجه درمان های ۲ و ۳ به نحو قابل ملاحظه‌ای موجب بهبود چین و چروک اکثر شرکت‌کنندگان می‌شدند. نتایج بهتر با استفاده از درجه درمان ۳ به دست آمد. میزان بهبود توسط پزشکانی بررسی شد که خطوط ریز و چروک‌ها را با استفاده از تصاویر درجه‌بندی می‌کردند و نمی‌دانستند کدام تصاویر مربوط به قبل یا بعد از درمان بوده‌اند. بهبود با مقیاسی بین حداقل امتیاز ۱ تا امتیاز ۹ تعریف شده و با داوری حداقل دو تن از ۳ پزشک امتیاز دهنده تثبیت می‌شد. همچنین، خود شرکت‌کنندگان نیز میزان بهبودی خود را ارزیابی کردند.

چهار هفته پس از آخرین درمان، ۴۵ تن از ۶۰ شرکت‌کننده (۷۵٪) شاهد بهبود چین و چروک‌های صورتشان بودند. دوازده هفته پس از آخرین درمان، ۳۷ تن از ۶۰ شرکت‌کننده (۶۲٪) شاهد بهبود در چروک‌های صورتشان بودند. لطفا توجه داشته باشید که ممکن است بهبود مشاهده شده تا حدی ناشی از اثرات غیرمرتبط با دستگاه بوده باشد. بر اساس نتایج حاصل از میزان رضایت خود شرکت‌کنندگان، پس از گذشت چهار هفته از آخرین درمان، ۳۶ تن از ۴۷ شرکت‌کننده (۷۷٪) متوجه بهبود در چروک‌های صورت خود شدند و پس از گذشت دوازده هفته از آخرین درمان، ۴۱ تن از ۵۵ شرکت‌کننده (۷۵٪) متوجه بهبود در چروک‌های صورت خود شدند.

ممکن است به دلیل تفاوت‌در نحوه‌ی استفاده‌ی شما از لیزر جوانسازی تریا، یا نحوه‌ی واکنش پوست شما به درمان، نتایج شما متفاوت باشد.

عوارض احتمالی

عوارض جانبی نمایان شده پس از درمان در مطالعه‌ی بالینی شامل موارد زیر بود: سرخی پوست (۵۷ تن از ۶۰ مورد)، احساس سوزش (۵۰ نفر از ۶۰ مورد) و احساس گرما (۴۷

تن از ۶۰ مورد). نتایج این مطالعه بالینی نشان می‌دهد که معمولا این اثرات طی چند دقیقه یا چند ساعت پس از درمان نمایان می‌گردد. هنگام استفاده‌ی روزانه از دستگاه، این عوارض جانبی کاهش می‌یابند و پیش از درمان بعدی از بین می‌روند، اما بسته به نحوه واکنش پوست شما به درمان ممکن است پیش از درمان دوم این مشکلات کاهش نداشته باشند. یک درمان دیگر را نیز انجام دهید تا همه‌ی عوارض جانبی به طور کامل از بین بروند. در مطالعه‌ی بالینی تمامی این عوارض جانبی طی مدت چهار هفته پس از توقف درمان برطرف شدند.

سایر عوارض جانبی گزارش شده در این مطالعه بالینی عبارتند از: خشکی پوست (۲۱ تن از ۶۰ مورد)، تیرگی موقتی پوست (۱۶ تن از ۶۰ مورد)، سردرد (۴ تن از ۶۰ مورد)، نقاط قهوه‌ای رنگ موقتی (۸ تن از ۶۰ مورد)، حساسیت پوستی (۹ تن از ۶۰ مورد)، پوسته پوسته شدن (۲ تن از ۶۰ مورد). سایر عوارضی که هرکدام تنها توسط یکی از شرکت‌کنندگان گزارش شد شامل خشکی لب، خون‌مردگی و سایش پوست می‌شد. البته تمام این عوارض جانبی گزارش شده لزوما حاصل از کار با این دستگاه نیست.

در ۵ تن از ۶۰ مورد، تیرگی پوست بیش از سه ماه طول کشید. اگر شما دچار تیرگی پوست شدید، می‌بایست درمان خود با این دستگاه را متوقف کنید.


در صورتی که از لیزر جوانسازی تریا بطور نادرست استفاده شود، خطرات دیگری نیز وجود دارد.
در جدول زیر برخی از این خطرات ذکر شده است.

احتمال وقوع اثر در حالت عادی	اثر احتمالی	استفاده نادرست
احتمال کم، در مطالعات بالینی گزارش نشده است.	ناراحتی یا خارش	استفاده از لیزر تریا روی پوست مبتلا به عفونت، سوختگی، یا بریدگی
احتمال بسیار کم. در مطالعات بالینی گزارش نشده است.	آسیب جدی به چشم نظیر تاری موقتی یا دائمی دید و یا کوری دائمی	استفاده از لیزر تریا برای درمان چشم یا پلک‌ها هدف‌گیری مستقیم لیزر بروی چشم‌ها
احتمال بسیار کم. در مطالعات بالینی گزارش نشده است.	آسیب به خالکوبی یا افزایش احتمال آسیب به پوست	استفاده از لیزر تریا روی پوست خالکوبی شده

احتمال وقوع اثر در حالت عادی	اثر احتمالی	استفاده نادرست
<p>در صورت استفاده‌ی درست، احتمال بسیار کم.</p> <p>در مطالعه‌ی بالینی، شرکت‌کنندگان تنها یکبار در روز از لیزر تریا استفاده می‌کردند و تنها میزان ناچیزی التهاب پوستی از قبیل موارد زیر گزارش شد:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سرخی: ۵۷ مورد از ۶۰ نفر • سوزش: ۵۵ مورد از ۶۰ نفر • احساس سوختگی: ۵۰ مورد از ۶۰ نفر • گرما: ۴۷ مورد از ۶۰ نفر <p>در اثر درمان یک ناحیه بیش از یکبار در شبانه روز ممکن است التهابات بیشتری بوجود آید.</p>	<p>افزایش خطر التهاب پوست</p>	<p>درمان هر منطقه بیش از یکبار در هر شبانه روز (۲۴ ساعت)</p>

احتمال وقوع اثر در حالت عادی	اثر احتمالی	استفاده نادرست
احتمال بسیار کم. در مطالعات بالینی گزارش نشده است.	اگر به درستی استفاده نشود منجر به آسیب جدی می‌شود	استفاده روی افراد زیر ۱۸ سال
احتمال بسیار کم. در مطالعات بالینی گزارش نشده است.	خطرات مربوط به ایمنی برای زنان باردار نامشخص است	استفاده توسط زنان باردار
<p>در صورت استفاده‌ی درست، احتمال کم.</p> <p>در مطالعه بالینی ۱۶ مورد از ۶۰ نفر دچار تیرگی موقت پوست شدند که ۵ مورد از آن‌ها بیش از سه ماه به طول انجامید.</p> <p>افراد با پوست تیره رنگ بیشتر در معرض سرخی مداوم هستند که در نهایت منجر به تیره‌تر شدن پوست می‌شود. اگر دچار سرخی مداوم شدید، استفاده از دستگاه را تا برطرف شدن سرخی متوقف کنید.</p>	تیرگی موقت پوست	عدم توقف درمان روی پوستی که با نور لیزر تیره می‌شود

پیش از اولین درمان با لیزر جوانسازی تریا

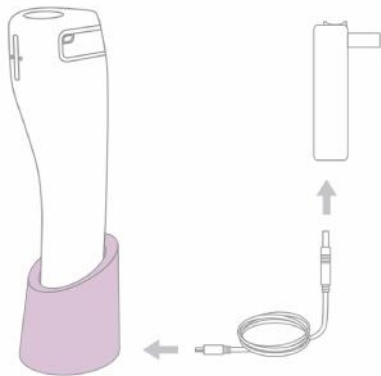

زمانی کامل است که پس از روشن کردن لیزر، نشانگر باتری همچنان خاموش باقی بماند.

لیزر جوانسازی تریا را شارژ کنید

- کابل را به مبدل برق و پایه‌ی نگهدارنده‌ی شارژ متصل کنید. آنگاه مبدل برق را به پریز برق متصل نمایید.
- لیزر جوانساز تریا را داخل پایه‌ی نگهدارنده‌ی شارژ قرار دهید.
- در حین شارژ شدن لیزر، نشانگر باتری چشمک‌زن می‌ماند. هنگامی که شارژ کامل شد، نشانگر باتری خاموش می‌شود. ممکن است که لیزر با شارژ کامل به دست شما برسد و نیازی به شارژ برای بار نخست نداشته باشد.
- برای راحتی، توصیه می‌شود که بین دو درمان لیزر جوانساز را در پایه‌ی نگهدارنده‌ی شارژ قرار بدهید. با این کار شارژ لیزر همواره کامل و آماده‌ی استفاده می‌باشد.

ویدئوهای مربوط به روش استفاده را تماشا کنید

برای دسترسی به اطلاعات مفید و تکنیک‌های استفاده از لیزر جوانساز تریا به وبسایت ما www.tria-beauty.ir سر بزنید.

توجه: هنگامی که شارژ باتری کم باشد، چراغ باتری روشن می‌شود. اگر در حین درمان چراغ باتری روشن شد، می‌توانید پیش از شارژ مجدد درمان خود را کامل نمایید. نشانگر باتری در هنگام شارژ چشمک‌زن و با کامل شدن شارژ (تا دو و نیم ساعت) خاموش خواهد شد. شارژ دستگاه

لیزر را روی یک ناحیه از پوست امتحان کنید

اگر نخستین بار است که از لیزر جوانساز تریا استفاده می کنید، توصیه می شود پیش از درمان آن را با همان سطحی و شدتی که می خواهید درمان را شروع کنید روی پوست ساعد خود تست نمایید. این کار به شما کمک می کند تا پیشاپیش احساسی از چگونگی درمان داشته باشید. بیشتر کاربران پس از چند روز استفاده از لیزر به احساسی که از درمان ایجاد می شود عادت می کنند. اگر با واکنش هایی چون تاول زدن یا زخم و پوسته شدن پوست مواجه شدید از لیزر جوانساز تریا استفاده نکنید. این واکنش ها به شدت نادر هستند.

۱. ناحیه ای از ساعد خود را که برای درمان انتخاب کرده اید شسته و خشک نمایید.

۲. قفل دستگاه را باز کنید. لیزر خود به خود روی سطح درمان یک تنظیم می شود.

۳. نوک لیزر را صاف مقابل پوست قرار دهید و آن را به آرامی روی ناحیه ی مورد نظر از یک سو به سوی دیگر حرکت دهید. این کار را برای چند ثانیه ادامه دهید.

۴. ۲۴ ساعت صبر کنید و سپس ناحیه درمان را بررسی نمایید. اگر ظاهر پوست طبیعی بود نخستین درمان خود را آغاز کنید.

روش استفاده از لیزر جوانساز تریا

دستورات زیر نحوه استفاده صحیح از لیزر جوانساز تریا را به شما نشان می‌دهد.

۱. پوست خود را آماده کنید


صورت خود را بشویید و خشک کنید. جهت حصول بهترین نتایج از کلینزر مقدماتی تریا استفاده نمایید، که به صورت خاص برای پاک کردن مواد آرایشی، ضدآفتاب‌ها و سایر آلودگی‌ها از روی پوست تهیه شده است.

۲. درجه شدت درمان خود را انتخاب کنید

لیزر جوانسازی تریا را از شارژر خود جدا کنید و دکمه پاور را فشار دهید تا روشن شود. از باز بودن قفل دستگاه اطمینان حاصل کنید. از دکمه پاور جهت انتخاب درجه درمان دلخواه خود استفاده کنید (سطح آموزشی ۱، سطح درمان ۲، سطح درمان ۳).

از سطح درمان آموزشی ۱ برای انس گرفتن با حس ناشی از لیزر استفاده کنید. به محض این‌که با دستگاه خو گرفتید، درمان خود را با سطوح درمان ۲ یا ۳ آغاز کنید.

جهت راحتی کار، لیزر شما درجه درمانی که آخرین بار با آن کار کرده‌اید را به خاطر می‌سپرد.

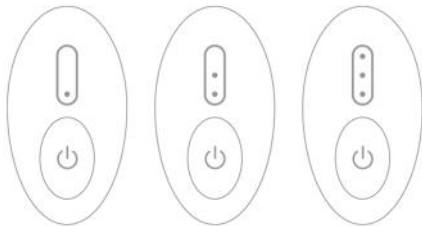

درجه درمان ۱

درجه درمان ۲

درجه درمان ۳


۳. پوست خود را درمان کنید

در حین درمان، مانند تصویر زیر صورت خود را به ۴ منطقه تقسیم کنید تا از درمان یکنواخت روی تمام صورت خود مطمئن شوید. تا شنیدن صدای بوق دستگاه، به درمان منطقه ۱ پردازید، سپس به همین ترتیب به مناطق ۲، ۳ و ۴ بروید.

نظیر تاری دید یا نابینایی موقت و یا دائمی می‌گردد. تنها تا جایی که استخوان زیر پوست را احساس می‌کنید به درمان نواحی اطراف چشم ادامه دهید.


هشدار: هر منطقه را بیش از یک بار در شبانه روز درمان نکنید. این کار موجب افزایش احتمال بروز التهابات پوستی می‌شود.

هشدار: از این دستگاه برای درمان چشم یا پلک خود نکنید. این کار موجب آسیب‌های شدید چشمی

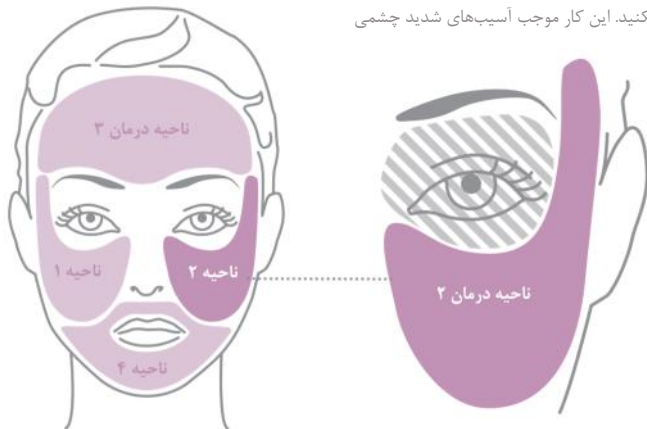

هنگامی که پیشانی خود را درمان می‌کنید، ممکن است برایتان راحت‌تر باشد که دستگاه را افقی بگیرید و آن را به بالا و پایین حرکت دهید. به یاد داشته باشید که به حرکت دستگاه و تماس کامل آن با پوست ادامه دهید تا نور بنفش تماس روشن بماند.

✓ تماس صحیح با پوست

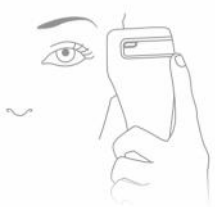

✓ حرکت صحیح



✗ تماس ناصحیح با پوست



✗ حرکت ناصحیح



برای درمان هر منطقه، درپچه درمان دستگاه را بطور صاف و کامل روی پوست خود قرار دهید، و آن را به آرامی از سمتی به سمت دیگر بکشید تا تمام منطقه را بپوشاند. به حرکت دستگاه و تماس کامل آن با پوست ادامه دهید تا نور بنفش تماس روشن بماند.

پس از درمان منطقه اول، لیزر جوانسازی تریا یکبار بوق می‌زند، پس از اتمام منطقه دوم، دوبار بوق می‌زند، و پس از درمان منطقه سوم، سه بار صدای بوق از دستگاه شنیده می‌شود.

پس از درمان هر چهار منطقه، نشانگر اتمام درمان (علامت تیک) روشن می‌شود، صدای ویژه‌ای از دستگاه شنیده می‌شود و سپس دستگاه بطور خودکار خاموش می‌شود.


توجه: اگر پیش از صدای بوق دستگاه از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگری بروید، ممکن است آن منطقه به مقدار کافی درمان نشود. برای رسیدن به بهترین نتایج پیش از شنیدن صدای بوق درمان یک منطقه از صورت را متوقف نکنید و به منطقه‌ی دیگر نروید.

تا شنیدن صدای بوق دستگاه به درمان هر منطقه ادامه دهید. این مدت برای هر منطقه با درجه درمان آموزشی حدوداً ۳۰ ثانیه، برای درجه درمان ۲ یک دقیقه، و برای درجه درمان سه ۲/۵ دقیقه به طول می‌انجامد.

حرکت صحیح ۱ ✓



حرکت صحیح ۲ ✓

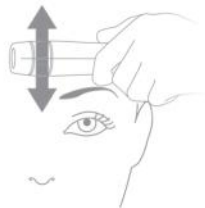

مدت زمان استفاده از لیزر جوانسازی تریا

از لیزر جوانسازی خود ۵ روز در هفته به مدت ۱۲ هفته، استفاده نمایید. طول دوره درمان شما نباید از ۱۲ هفته بیشتر باشد.

موارد مورد انتظار

توصیه می‌کنیم درمان با لیزر جوانسازی تریا را بخشی از برنامه عصرگاهی خود قرار دهید. با این کار فرصت شروع ترمیم و کاهش عوارض جانبی را در طول مدت شب برای پوست خود فراهم می‌کنید.

معمولا کاربران پس از دو هفته بهبود را احساس می‌کنند، و بهترین نتایج چند هفته پس از پایان دوره درمان حاصل می‌شود.

ممکن است بلافاصله پس از درمان احساس ناراحتی داشته باشید. همچنین ممکن است حس گرمایی مشابه آفتاب سوختگی را تجربه کنید. این مسائل طبیعی هستند و معمولا طی چند دقیقه یا چند ساعت پوست شما تسکین می‌یابد.

ممکن است در حین درمان یا بلافاصله پس از اتمام درمان با سرخی موقتی پوست‌تان مواجه شوید. این مسئله طبیعی بوده و در طول مدت شب یا طی سه

روز برطرف می‌شود.

اثرات جانبی دیگری که ممکن است با استفاده عادی از دستگاه بروز کند عبارت است از:

- تورم پوست. این اثر عموماً در طول شب کاهش می‌یابد.
- خشکی یا پوست پوست شدن.
- خال‌های موقتی ریز قهوه‌ای روی پوست.

از یک سرم تسکین دهنده پوست یا مرطوب کننده برای کمک به تسکین ناراحتی‌های پوستی پس از درمان استفاده نمایید. برای حصول بهترین نتایج از سرم تکمیلی تریا استفاده کنید.

توجه: چنانچه عوارض قابل توجه و مزمن دیگری داشتید درمان را متوقف کنید و با دفتر خدمات پس از فروش تریا تماس بگیرید.

نکاتی سودمند جهت حصول بهترین نتایج

ویدئوی آموزشی را تماشا کنید

ویدئوهای آموزشی استفاده از لیزر جوانسازی و ضد چروک تریا را می‌توانید از وبسایت ما و یا با تماس با کارشناسان ما دریافت کنید و بهترین شیوهی استفاده از لیزر تریا روی پوست را در آن ببینید.

در آینه تمرین کنید

درمان‌های اولیه خود را در مقابل آینه انجام دهید. بدین ترتیب به هنگام تماس کامل دستگاه با پوست و جابجا کردن آن، درخشش نور تماس بنفش رنگ را خواهید دید.

شب‌ها درمان کنید

شب‌ها پیش از خواب از دستگاه لیزر جوانساز خود جهت درمان استفاده کنید تا در طول شب، هرگونه سرخی و التهاب احتمالی روی پوست‌تان فرصت تسکین داشته باشد.

درجه شدت درمان خود را افزایش دهید

ممکن است یک حدود هفته طول بکشد تا پوست شما به درمان با لیزر عادت کند. در این مدت می‌توانید از درجه درمان ۱ استفاده نمایید. همین‌که پوست‌تان به درمان عادت کرد، درمان خود را با درجه شدت‌های ۲ یا ۳ آغاز کنید.

از پوست خود در برابر نور خورشید محافظت

کنید

روزانه از یک ضدآفتاب مرغوب استفاده نمایید. بدین ترتیب می‌توانید از مزایای لیزر جوانساز تریا بهره‌مند شده، به نتایج ماندگارتری برسید و از آسیب‌های جدید ناشی از آفتاب‌سوختگی پیشگیری کنید.

مراقبت از دستگاه لیزر جوانسازی تریا

پاک‌سازی

جهت رسیدن به بهترین نتایج، سر لیزر را پاکیزه نگهدارید. روغن‌ها، لوسیون‌ها، مواد آرایشی یا سایر موارد می‌توانند مانع رسیدن نور لیزر به پوست و یا عملکرد مناسب آن شوند.

اگر سر لیزر یا درپچه‌ی درمان خیلی کثیف شده است آن را با یک پارچه تمیز کنید.

اگر سایر بخش‌های دستگاه یا پایه‌ی شارژ کثیف شده است آن را با یک پارچه‌ی نرم آغشته به الکل پاک کنید.

اطمینان یابید که به هنگام تمیز کردن، دستگاه به برق متصل نباشد. از نفوذ آب به درون دستگاه جلوگیری نمایید.

حفظ و مراقبت

این دستگاه به مراقبت ویژه و منظم شما نیاز ندارد. اگر فکر می‌کنید دستگاه یا شارژر آن به درستی کار نمی‌کند یا آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید. با دفتر خدمات پس از فروش تریابیوتی تماس بگیرید تا کارشناسان شما را راهنمایی کنند.

نگهداری

دستگاه و شارژر را دور از آب و رطوبت قرار دهید.

سفر

اگر به مسافرت می‌روید، جهت جلوگیری از آسیب، دستگاه و شارژر آن را درون جعبه‌ی خودش بسته بندی کنید.

پایه‌ی شارژ به درستی در هر ولتاژی کار می‌کند (بین ۱۰۰ و ۲۴۰ ولت با ۵۰-۶۰ هرتز). ممکن است جهت اتصال شارژر به سوکت برق به یک آداپتور نیاز داشته باشید.

حل مشکلات احتمالی

از جدول زیر برای حل مشکلات احتمالی استفاده کنید. اگر همچنان مشکل تان برطرف نشد، با دفتر خدمات پس از فروش تریا تماس بگیرید.

پرسش شما	ممکن است که...	چطور حل کنیم
لیزر جوانساز من روشن نمی‌شود.	لیزر جوانساز شما قفل است.	قفل لیزر جوانساز خود را باز کنید.
لیزر جوانساز من خاموش نمی‌شود.	بطور اتفاقی دکمه پاور را خیلی زود رها کرده‌اید.	دکمه پاور را فشار داده و برای ۱-۳ ثانیه نگهدارید، سپس آن را رها کنید.
نشانگر خطای دستگاه (!) روشن است.	لیزر جوانساز شما به درستی کار نمی‌کند.	دستگاه خود را خاموش کنید و مجدداً روشن نمایید. اگر همچنان نشانگر خطا روشن بود با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

چطور حل کنیم	ممکن است که...	پرسش شما
<p>بررسی کنید که لیزر به درستی روی پایه قرار گرفته باشد و کابل برق بطور صحیح به هر دو انتها وصل شود و کاملاً در پریز برق قرار گیرد.</p>	<p>دستگاه شما به درستی متصل نشده است.</p>	<p>هنگامی که لیزر جوانساز خود را روی پایه شارژ می‌گذارم، شارژ نمی‌شود.</p>
<p>یک خروجی برق متفاوت را امتحان کنید.</p>	<p>پریز منزلتان کار نمی‌کند.</p>	
<p>موقعیت لیزر را روی پایه تغییر دهید. مطمئن شوید که نشانگر باتری روشن باشد.</p>	<p>لیزر شما به طور کامل روی پایه قرار نگرفته است.</p>	
<p>دستگاه خود را روشن کنید. اگر نشانگر باتری همچنان خاموش است، دستگاه شما شارژ کافی دارد و آماده استفاده است.</p>	<p>لیزر جوانساز شما پیشاپیش دارای شارژ کامل است.</p>	

چطور حل کنیم	ممکن است که...	پریش شما
لیزر خود را روی پایه قرار داده و شارژ نمایید.	لیزر شارژ نشده است.	هنگامی که از لیزر جوانسازی تریا استفاده می‌کنم، نور تماسی بنفش روشن نمی‌شود.
لیزر را به آهستگی و پیوسته روی پوست بکشید.	سر لیزر به طور کامل در تماس با پوست نیست.	
لیزر را شارژ کنید و مجددا تلاش کنید. اگر همچنان مشکلی وجود دارد با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	لیزر شما به درستی کار نمی‌کند.	
لیزر را به آهستگی و پیوسته روی پوست بکشید.	دریچه درمان لیزر در تماس کامل با پوست شما نیست.	هنگامی که از لیزر استفاده می‌کنم نور بنفش متناوبا روشن و خاموش می‌شود.
دریچه درمان را با یک دستمال خشک بدون پرز تمیز کنید.	جرم و آلودگی دریچه درمان را مسدود کرده است.	

چطور حل کنیم	ممکن است که...	پرسش شما
<p>درجه درمان دستگاه را بررسی کنید و اگر لازم بود میزان آن را تغییر دهید.</p>	<p>دریچه درمان دستگاه در تماس کامل با پوست شما نیست.</p>	<p>در حال استفاده از لیزر جوانساز تریا، میزان سوزش و التهاب پوستم بطور محسوسی تغییر می کند.</p>
<p>دریچه درمان را با یک دستمال خشک بدون پرز تمیز کنید.</p>	<p>جرم و آلودگی دریچه درمان دستگاه را مسدود نموده است.</p>	
<p>ابتدا دستگاه خود را روشن کنید. سپس دکمه پاور را چند ثانیه نگه دارید تا علامت قفل روی نمایشگر روشن شود.</p>	<p>دستگاه شما روشن نشده است.</p>	<p>دستگاه لیزر من قفل نمی شود.</p>
<p>قفل لیزر جوانسازی تریا را باز کنید.</p>	<p>بطور اتفاقی دستگاه خود را قفل کرده اید.</p>	<p>دستگاه من قفل شده است / علامت قفل دستگاه روشن است.</p>

مدل: SRL

نوع لیزر: لیزر دایود

کلاس لیزر: 1M

توجه: این دستگاه لیزر تابش غیر مرئی از خود ساطع می کند. از آن برای چشم و پلک استفاده نکنید. همچنین با ابزارهای نوری نظیر میکروسکوپ و تلسکوپ به مشاهدهی این نور نپردازید. در صورت استفاده مطابق دستورالعمل هیچ خطری وجود ندارد.

طول موج خروجی: ۱۴۴۰ نانومتر

انرژی خروجی لیزر: ۵-۱۲ mJ/pulse

