

آشنایی با دستگاه‌های خانگی پرسونال میکرودرم

pmd



آمیتیس تجارت ماندگار

نمایندگی انحصاری محصولات PMD در ایران



درباره PMD



#اعتمادبنفس_درخشان را به معنای واقعی کلمه در سرتاسر جهان بنامی کند. ما با کمک ۱۰۰۰ تن از مردان و زنان از سرتاسر کره زمین، و بدون هیچ گونه سرمایه‌گذاری و صرف بودجه‌های کلان مرسوم در بازاریابی، PMD را عرضه نمودیم. ما خود را متعهد می‌دانیم تا اعتماد بنفس شما را در مورد پوست، من درون، و خانواده‌تان تقویت کنیم. حمایت و پشتیبانی شما به PMD این امکان را داده است که بخشی از سرمایه‌ی خود را وقف امور خیریه نماید و در خانواده‌های سرتاسر این جهان خاکی تحول و تفاوتی ایجاد نماید.

امروزه PMD حقیقتاً یکی از اولین کمپانی‌های صنعت زیبایی می‌باشد که با ارائه‌ی ابزار زیبایی هوشمند و محصولات مراقبت پوستی، الهام‌گر و موحد اعتماد بنفسی درخشش‌ده در بین مخاطبانش است. ما سخت کار و تلاش کرده‌ایم تا تولید محصولات زیبایی نوین و مجهرز به تکنولوژی هوشمند را رشد و توسعه دهیم و راه خود را تارسیدن به حداکثر میزان قدرت در ویژگی انحصاری دیسک چرخان و تکنولوژی ساکشن واکیوم کالیبره شده در دستگاه‌های PMD ادامه دهیم. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما درباره محصولات نوینی که در آینده عرضه خواهیم کرد هستیم. در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید تا در جریان رویدادهای جدید PMD باشید.

تکنولوژی هوشمند

PMD مجهرز به تکنولوژی‌های هوشمندی است که قادرمند، ایمن، راحت و انحصاری هستند. پرسونال میکروردرم از تکنولوژی انحصاری دیسک چرخان تعبیه شده در بلورهای اکسید آلومینیوم بهره‌مند است. تکنولوژی دیسک چرخان نه تنها از پوست شما لایه‌برداری می‌کند، بلکه ضدآلرژی نیز هست و به باکتری اجازه رشد نمی‌دهد. پرسونال میکروردرم همچنین مجهرز به واکیوم کالیبره است. بسیاری از محصولاتی که تحت عنوان «میکروردرم ابریزن» (microdermabrasion) عرضه می‌شوند اغلب، فاقد ساکشن حیاتی و اساسی هستند که میکروردرم حقیقی ایجاد کنند. محصولات مراقبت پوستی PMD با فرمولاتیون ویژه‌ی خود در هماهنگی کامل با دستگاه‌های پرسونال میکروردرم عمل می‌کنند. فرمول ابتکاری ما مورد تحقیق و پژوهش و آزمایش‌های متعدد قرار گرفته است و نتایج بی‌همتای آن به اثبات رسیده است.



حکایت‌های الهام‌بخش

PMD، چیزی فراتر از یک کمپانی تولید محصولات مراقبت از پوست است. ما شرکتی هستیم که به احیای اعتمادبنفس شما در مورد پوستان، درون خودتان، و خانواده‌تان احساس تعهد می‌کنیم. «#اعتمادبنفس_درخشندۀ» عنوان مجموعه ویدئوهایی است که بر انگیزش و تشویق زنان و مردان به احیای اعتماد بنفس خود و تعالی زندگی‌شان تمرکز دارد. PMD تنها یک برنده محصولات مراقبت پوستی نیست که صرفا در فکر فروش محصولات خود باشد، بلکه هدفی فراتر از این دارد. ما معتقدیم که PMD می‌تواند به انسان‌ها این قدرت را بدهد که به خودشان، همانگونه که هستند، عشق بورزند و از زندگی و تمامی موهاب آن لذت ببرند.»
- سام الکساندر، مدیرعامل کمپانی PMD



PMD بخشندۀ است

از سال ۲۰۱۰ که شرکت PMD تاسیس شده است تا کنون، شرکت PMD خود را وقف ایجاد اعتماد بنفسی درخشان و عالی در افراد، خانواده‌ها و اجتماعات تحت خدمات مانموده است. در سال ۲۰۱۲ PMD همکاری خود را با موسسه «اسمارتر پرنتینگ» آغاز نمود و از آن زمان تا کنون به ازای فروش هر پرسونال میکرودرم، ۵۰٪ دلار به این موسسه اهدا کرده است. «اسمارتر پرنتینگ» از والدین و متخصصان حرفه‌ای و با انگیزه‌ای تشکیل شده است که از طریق آموزش، خود را وقف بهبود و تقویت سطح خانواده‌ها می‌کنند. «اسمارتر پرنتینگ» به والدین می‌آموزد که چگونه مشوق، الهام‌بخش و راهنمای فرزندان خود باشند تا آن‌ها رویاهایی بزرگ‌تر، دستاوردهایی شگرف‌تر، و زندگی بهتری داشته باشند.



داستان ما

ابداع پرسونال میکرودرم PMD - فرایندی ۲۰۰۰ ساله

میکرودرم ابریژن یک مُد گذرا نیست. در واقع، می‌توان از ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، در سرتاسر جهان از این روش درمانی نشانی یافت؛ یعنی از زمانی که مصری‌ها نوعی سمباده اختراع کرده بودند که با آن پوستشان را صاف و هموار می‌کردند. در سال ۱۹۸۵، اولین ماشین میکرودرم ابریژن توسط دو دکتر ایتالیایی به نام‌های ماتیولی و بروتو اختراع شد. بعدتر، در سال ۱۹۹۰ ماشین‌های میکرودرم ابریژن در امریکا رواج یافتند. با اقبال گسترده‌ی این ماشین‌ها در هالیوود، آوازه‌ی میکرودرم ابریژن به سرعت در همه‌جا پیچید.



سال ۲۰۰۳

گروهی از پزشکان، مهندسین و متخصصین میکرودرم ابریژن اولین دستگاه خانگی میکرودرم ابریژن را در ابعاد کوچک تولید نمودند. پرسونال میکرودرم PMD، با تکنولوژی ابتکاری و انحصاری دیسک چرخان و ساکشن واکیوم کاملاً کالیبره شده‌ی خود، تحولی نو در درمان‌های خانگی پوست پدید آورد.

سال ۲۰۰۴

تحقیقی به سرپرستی دکتر مارک تیلور، پزشکی با شهرت جهانی، صورت گرفت که نشان می‌داد پرسونال میکرودرم PMD با ماشین‌های میکرودرم ابریژن ۱۰ هزار دلاری در مطب پزشکان برابری می‌کند.

«هفت بیمار مختلف برای مدت ۱۲ هفته با متوسط ۱۵ جلسه درمان برای هر یک از آن‌ها از این دستگاه خانگی استفاده نمودند. اغلب آن‌ها هر ۵ یا ۶ روز با پرسونال میکرودرم پوست خود را درمان می‌کردند.

بهبودی حاصل از این فرایند درمان با نتایجی که ما از درمان با تجهیزات تخصصی و حرفه‌ای میکرئدرم ابریژن بدست می‌آوریم برابری می‌کرد.»



اواخر سال ۲۰۰۴




PMD در یک تحقیق کلینیکی که در دانشگاه کالیفرنیا، واقع در سان فرانسیسکو، با شرکت ۵۴ بیمار (۴۴ زن و ۱۰ مرد) انجام شد مورد استفاده و بررسی قرار گرفت. پزشکان طی این بررسی متوجه نتایج زیر شدند:

- ۷۰٪ بهبودی در وضعیت چروک‌ها
- ۸۰٪ بهبودی در وضعیت صدمات ناشی از آفتاب سوختگی
- ۱۷۳٪ بهبودی در خشکی و زبری پوست
- ۷۰٪ بهبودی در وضعیت کلی پوست



۲۰۱۰ سال آغازی مفلسانه و فروتنانه

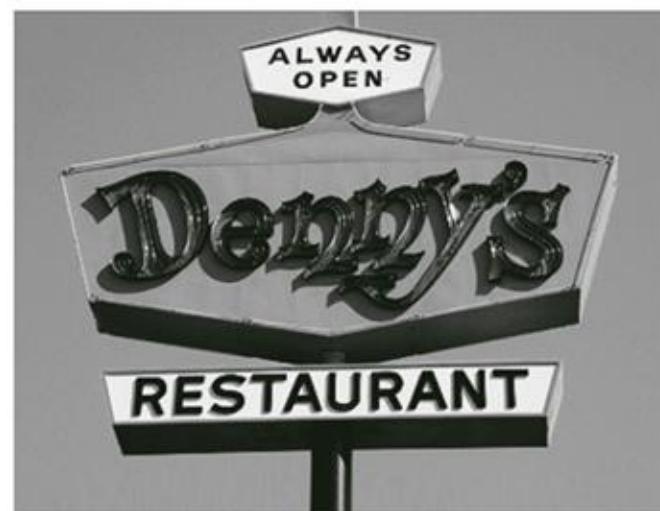

پیش از هر جای دیگری، داستان پیامدی اول بار در رستوران دنیز رقم خورد. سام الکساندر، مدیرعامل شرکت PMD در خاطرات خود می‌گوید:

«من برای بررسی یک دستگاه میکرودرم ابریژن خانگی، ساعت ۷ صبح به صرف صبحانه دعوت شده بودم. هنوز لحظه‌ای را که برای اولین بار PMD را دیدم به خاطر دارم. بلاfaciale فهمیدم که این دستگاه زندگی میلیون ها نفر را دگرگون خواهد کرد.»

با تکمیل مطالعات و تحقیق‌های کلینیکی دانشگاه کالیفرنیا و دکتر تیلور، این مسئله مطرح شد که چگونه بدون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری، می‌توان پرسونال میکرودرم را راهاندازی کرد و به بازار عرضه نمود. از اولین روزهای تولد PMD در سال ۲۰۰۴، ۱۸۰۰ دستگاه تولید شده بودند. از این ۱۸۰۰ دستگاه، ۵۰۰ تای آن‌ها به رایگان برای مادران و بلاگنویس فرستاده شد تا شاید نقد و بررسی‌های مثبتی از آن‌ها دریافت کنند. الکساندر می‌گوید:

«قلبمان از شدت هیجان برای دیدن سیلی از یادداشت‌ها درباره PMD در وبلاگ‌های مادرانه به تپش افتاده بود. خیلی زود پس از انتشار مطالب این وبلاگ‌ها، فروش ما بالا گرفت و گروه اجتماعی «اعتماد بنفس درخشنان» شکل گرفت.»



سال ۲۰۱۱، سال شهرت



از آنجاکه مردم تجرب واقعی خودشان با پرسونال میکرودرم را با هم به اشتراک می‌گذاشتند، آوازه و شهرت PMD همه‌جا پیچید. هزاران متن و ویدئو از داستان‌های ساده و صمیمی کاربران درباره تحولی که در زندگی‌شان ایجاد شده بود، نکات و ترفندها، و ویدئوهای آموزشی، در یوتیوب و وبلاگ‌ها منتشر شد. زنان و مردان نتایج شگفت‌انگیز و کمکی که PMD در احیای اعتمادبنفس‌شان کرده بود را با دیگران به اشتراک می‌گذاشتند.



سال ۲۰۱۲، آغاز بخشش‌های PMD

کمپانی PMD، با همکاری موسسه‌ی «اسمارتر پرنتینگ» (Smarter Parenting) متعهد است که با اهداء ۵/۰ دلار به ازای فروش هر پرسونال میکرودرم، به کودکان و خانواده‌ها کمک نماید.

«من چهار پسر دارم و برای تربیت هیچ کدامشان دفترچه راهنمایی نداشتم. فرزند پروری هوشمندانه‌تر (Smarter Parenting) به والدین می‌آموزد چگونه والدینی باشند و چگونه فرزندانشان را تشویق کنند تا به خود باور داشته باشند. اگر بتوانیم اعتقاد بنفس درخشانی در خود، خانواده‌ها و گروه‌های اجتماعی بپروریم، آن‌گاه شاید بتوانیم دنیا را عوض کنیم.»

سام الکساندر، مدیر عامل شرکت PMD



۲۰۱۲

پس از دو سال از شروع بدون هیچ سرمایه‌ی قابل ملاحظه‌ای، PMD در برنامه شوی تلویزیونی دکتر آز ظاهر شد.

«یک روز در دفتر کارم بودم و مشغول خیال‌پردازی درباره شناساندن PMD به مردم جهان بودم که از طرف تهیه‌کننده‌ی شوی دکتر آز با من تماس گرفتند. تهیه‌کننده به من گفت که دکتر آز پرسونال میکرودرم PMD را دیده است و می‌خواهد از شما برای معرفی و نمایش دستگاه در برنامه‌اش اجازه بگیرد. به معنای واقعی کلمه قلبم به تپش افتاد و البته پاسخ مثبت دادم! این داستان رویایی بود که به واقعیت پیوست.»



شرکت PMD با فروشنده‌گان معتبر

Harrods Neiman Marcus


bloomingdales

NORDSTROM ULTA

SEPHORA

سال ۲۰۱۵، معرفی PMD پرو

دستگاه PMD پرو دارای کلاهک‌های روان کننده (Smooth-Glide Caps)، قابلیت تنظیم سرعت و سست کامل و متنوعی از دیسک‌های لایه‌بردار جهت افزایش هرچه بیشتر کنترل درمان در دست شما می‌باشد. از پوست‌های بسیار حساس گرفته، تا پوست‌های محکم و زبر، تنظیمات مناسب با هر نوع پوستی در این دستگاه یافت می‌شود و شما می‌توانید درمان‌های خود را مطابق میل خود، سفارشی کنید. پرسونال میکرودرم پرو، اول بار فروش خود را در سایتهاي سفورا، نورداستر، نورداستر و آلتا آغاز نمود.

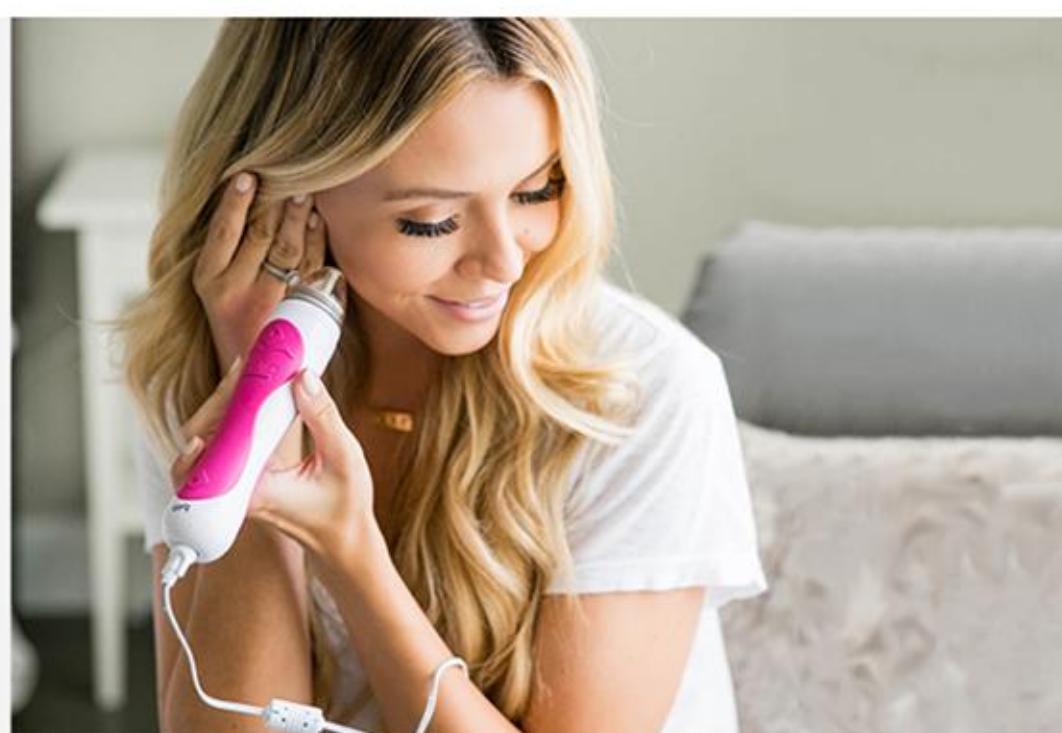

جایزه‌های بیشتر، شهرت افزون تر



allure THE BEAUTY EXPERT

TODAY

THE VIEW

THE TALK

O

SELF

People

BEST
BEAUTY
AWARD

nm Beauty Awards 2013

02188614547

02188051347

www.amitisco.com

آمیتیس تجارت ماندگار
تمایندگی انحصاری محصولات PMD در ایران



عرضهی محصولات مراقبت از پوست

هزاران ساعت تحقیق و بررسی و رشد و تکامل، نتایج هریک از محصولات سیستم بازسازی روزانه سلول‌ها را ثابت نموده‌اند و نشان داده‌اند که بیش از هر رژیم مراقبت پوستی دیگری اثربخشی میکرودرم ابریژن را تقویت می‌کند. مواد طبیعی تشکیل‌دهنده‌ی این محصولات به تسکین، آرامش بخشیدن، و افزایش جانشینی سلول‌ها، تعادل در میزان PH، کاهش سوزش، سرخی و التهابات پوستی کمک می‌کند. روی هم رفته، نتایج بدست آمده حقیقتاً انکارناپذیرند.



اکنون، آینده و نوآوری

PMD تلاش می‌کند تا به معنای واقعی کلمه در سرتاسر دنیا #اعتماد_درخشان ایجاد نماید. ما خود رویاپردازانی هستیم که معتقدیم همه‌چیز ممکن است. با کمک ۱۰۰۰ تن از مردان و زنان سرتاسر دنیا و بدون هیچ سرمایه‌ی قابل ملاحظه‌ای جهت بازاریابی PMD را وارد بازار کردیم. موفقیت ما مدیون کسانی است که محصولات ما را دوست دارند و نظراتشان را با سایرین به اشتراک می‌گذارند. بدین ترتیب، PMD توانسته است که بخشی از سرمایه‌ی خود را وقف امور خیریه نماید و در خانواده‌های سرتاسر این جهان خاکی تحول و تفاوتی ایجاد نماید. ما خود را متعهد می‌دانیم تا اعتماد بنفس شما را در مورد پوست، من درون، و خانواده‌تان تقویت کنیم.

امروزه PMD حقیقتاً یکی از اولین کمپانی‌های صنعت زیبایی می‌باشد که با ارائه‌ی ابزار زیبایی هوشمند و محصولات مراقبت پوستی، الهام‌گر و موحد اعتماد بنفسی درخشش‌نده در بین مخاطبانش است. ما سخت کار و تلاش کرده‌ایم تا تولید محصولات زیبایی نوین و مجهز به تکنولوژی هوشمند را رشد و توسعه دهیم و راه خود را تاریخی‌تر می‌زنیم. بدین ترتیب در ویژگی انحصاری دیسک چرخان و تکنولوژی ساکشن واکیوم کالیبره شده در دستگاه‌های PMD ادامه دهیم. مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما درباره محصولات نوینی که در آینده عرضه خواهیم کرد هستیم. در شبکه‌های اجتماعی به ما بپیوندید تا در جریان رویدادهای جدید PMD باشید.

سام الکساندر، مدیرعامل کمپانی پی‌ام‌دی



02188614547

02188051347

www.amitisco.com

آمیتیس تجارت ماندگار
نمایندگی انحصاری محصولات PMD در ایران



پرسونال میکرودرم



دستگاه پرسونال میکرودرم تکنولوژی جدید و به ثبت رسیده دیسک چرخان (Spinning Disc) را با ساکشن واکیوم کالیبره شده در هم آمیخته است تا رنگ و بافت پوست را درخشان، صاف و یکدست نماید.

پرسونال میکرودرم خطوط و چروک، جوش‌ها و آکنه‌ها و منافذ درشت روی پوست را کاهش می‌دهد. پس از درمان، محصولات مراقبت از پوستی به نحو قابل ملاحظه‌ای عمیق‌تر از پیش در پوست نفوذ می‌کنند. (۲۰ برابر عمیق‌تر)

پک این دستگاه شامل قطعات جانبی زیر است:



تازه باش و درخشان باش

پرسونال میکرودرم یک وسیله‌ی مراقبت پوستی خانگی و جدید است که همان نتایج درخشانی را که درمان‌های میکرودرم ابیریژن کلینیکی به همراه دارند به ارمغان می‌آورد. پرسونال میکرودرم با ترکیب قدرت تکنولوژی انحصاری دیسک چرخان (Spinning Disc) و ساکشن واکیوم کالیبره شده‌ی فوق العاده عالی، قادر به از بین بردن سلول‌های مرده و راکد پوست، افزایش جریان خون و تحریک روند طبیعی بدن جهت بازسازی کلاژن و الاستین می‌باشد.

درخشش خود را دریاب

روی هم رفته، پرسونال میکرودرم رنگ و بافت پوست را درخشان، صاف، هموار و یکنواخت می‌نماید، و موجب کاهش خطوط و چروک، جوش‌ها و آکنه‌ها، و منافذ درشت پوستی می‌شود. با میکرودرم، پوستی تازه و باطرافت به چهره‌ی خود بنشانید و به پوستی دلپذیر و زیبا سلام کنید!



ارکان درخشندگی PMD

قدرت لایه برداری

تکنولوژی انحصاری دیسک چرخان (Spinning Disc)




دستگاه پرسونال میکرودرم از یک دیسک چرخان انحصاری با کریستال‌های اکسید الومینیوم بهره می‌برد تا سلول‌های مرده و راکد را از سطح پوست لایه‌برداری کند. این دیسک چرخان انحصاری بدون هیچ زحمتی و بدون هیچ‌گونه سایش دستی، از پوست لایه‌برداری می‌کند. با از بین بردن این موانع و سلول‌های مرده، فرایند رشد سلول‌های جدید تحریک شده و پوستی جوان، درخشان و لطیف را نمایان می‌سازد. هر هفته از پرسونال میکرودرم استفاده کنید تا پوستان جوان‌تر، سرزنه‌تر و باطرافت‌تر از پیش شود.

قدرت ساکشن


بسیاری از محصولاتی که تحت عنوان «میکرودرم ابریزن» (microdermabrasion) عرضه می‌شوند اغلب، فاقد ساکشن حیاتی و اساسی هستند که میکرودرم حقیقی ایجاد کنند. ساکشن، قدرت پشت پرده‌ی میکرودرم ابریزن است و مزایای حاصل از یک ساکشن واکیوم کالیبره شده بسیار فراتر از صرفاً حذف سلول‌های مرده و راکد در حین فرایند لایه‌برداری می‌باشد. ساکشن واکیوم نتایج واقعی از جمله پوستی لطیفتر، مستحکم‌تر و باطرافت‌تر را به ارمغان می‌آورد.

پرسونال میکرودرم شامل یک ساکشن واکیوم کالیبره شده‌ی فوق العاده است، و این تکنولوژی منحصر بفرد جریان خون را به سطح پوست می‌کشاند و درنتیجه میزان جریان و گردش خون در سطح پوست را افزایش می‌بخشد. این ساکشن فرایند طبیعی ترمیم را در بدن برانگیخته می‌نماید که در نهایت به تولید کلاژن و الاستین و افزایش استحکام و درخشندگی پوست منجر می‌شود.

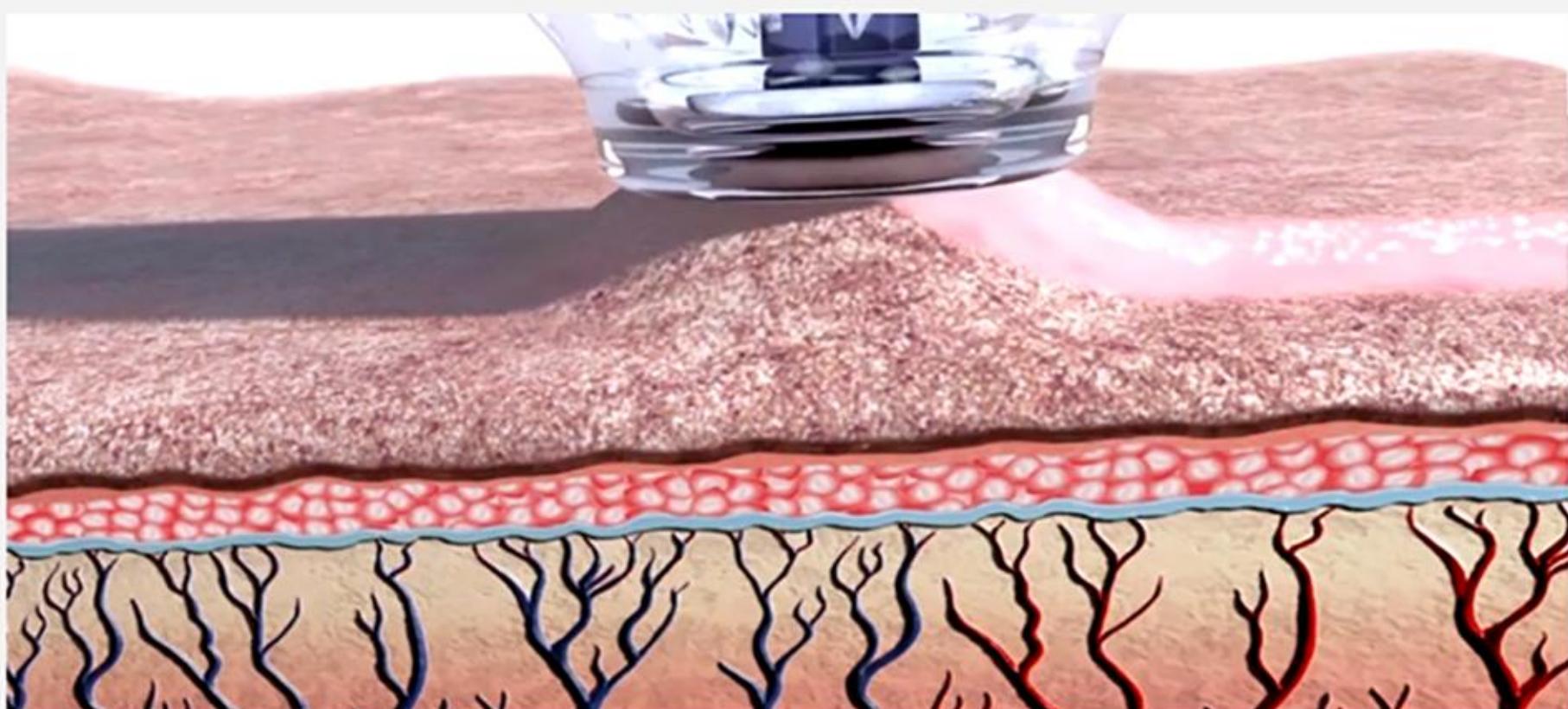

زیبایی جذب

پرسونال میکرودرم، با بهره‌گیری از تکنولوژی انحصاری دیسک چرخان بدون هیچ زحمتی موائع و سلول‌های مرده و راکد پوست را از بین می‌برد. همین که این موائع حذف شدند، محصولات مراقبت پوستی کاملاً جذب سطح پوست می‌شوند. به این ترتیب، مزایای حاصل از محصولات مراقبت پوستی به بیشترین میزان خود می‌رسد تا به بازسازی و به کمال رساندن پوست شما کمک کند و آن را نرم و لطیف، روشن، شفاف و درخشان نماید.

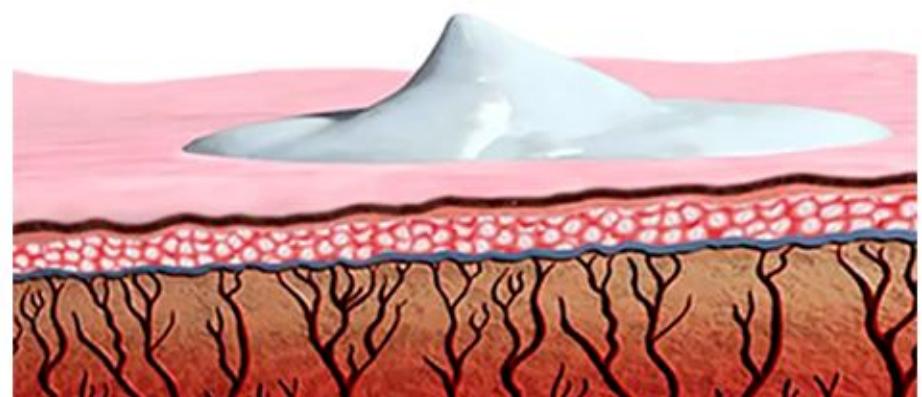

بازتاب رسانه‌ها

نگذارید اهمیت مراقبت از پوستان در جریان اقتضایات زندگی کم رنگ شود. با استفاده‌ی هفتگی از پرسونال میکرودرم، وضعیت پوست خود را متحول کنید و جوان‌تر دیده شوید. اگر باور نمی‌کنید، نگاهی به رسانه‌ها و مجلات زیبایی بیاندازید و ببینید که چرا «صبح بخیر امریکا» گفته است: «مردم روی پرسونال میکرودرم قسم می‌خورند.»

پوست خود را دگرگون کنید

این بر عهده‌ی خود شماست که زندگی دلپذیری داشته باشید و از پوست خود مراقبت نمایید. اولین باری که از دستگاه پرسونال میکرودرم استفاده کنید، پوستان صاف‌تر و درخشان‌تر دیده می‌شود. تنها با ۸ جلسه‌ی درمانی، متوجه خواهید شد که پوستان ظاهری جوان‌تر به خود گرفته است. سرانجام، با نظاره‌ی ظاهر خود، گویی که درون خود را حس می‌کنید. احساس اعتماد بنفس خواهید کرد و به پوست درخشنده‌ی سالم خود عشق می‌ورزید.



اطلاعات تکمیلی

وزن تقریبی: ۷۲۶ گرم

ابعاد: ۳ * ۶ * ۸ اینچ

رنگ: کلاهک صورتی، کلاهک آبی؛ خاکستری، آبی مایل به خاکستری، صورتی



مقایسه دستگاه‌های PMD



PMD پلاس



PMD اینترنشنال پرو



PMD اینترنشنال



PMD برای آقایان



PMD پرو



PMD کلاسیک

کارآیی

PMD پلاس دارای تکنولوژی محبوب کلاهک روان‌کننده (Smooth-Glide Cap) روی پوست و همچنین تعداد متعددی از دیسک‌ها (۱۰ دیسک سفید، ۲ دیسک خاکستری، ۲ دیسک آبی، ۲ دیسک سبز و ۲ دیسک قرمز) می‌باشد. این دیسک‌ها به شما امکان سفارشی کردن درمان از بسیار حساس و ملایم تا فشرده و شدید را فراهم می‌سازد.

PMD اینترنشنال همان دستگاه کلاسیک ماست که از ۱۱۰ ولت تا ۲۲۰ و ۲۳۰ ولت تا ۲۲۰ و ۲۳۰ ولت تنظیم شده است و همراه با یک آدپتور پوستی، حذف موهای زیرپوستی، و همراه با یک آدپتور بین‌المللی بین‌المللی عرضه می‌شود تا در همه‌ی کشورها قابل استفاده باشد.

PMD برای آقایان، به طور ویژه برای پوست آقایان طراحی شده است تا به کاهش منافذ درشت پوستی، حذف موهای زیرپوستی، و هموار کردن پوست‌های زبر عرضه می‌شود تا در همه‌ی صاف و هموار کردن درمان شما جهت سفارشی کردن درمان شما کمک رساند. پرسونال میکرودرم کشورها قابل استفاده باشد.

PMD پرو دارای کلاهک‌های روان کننده (Smooth-Glide Caps)، قابلیت تنظیم سرعت و ست کامل و متنوعی از دیسک‌های لایه‌بردار چرخان (Spinning Disc) را با ساکشن واکیوم کالیبره شده در هم آمیخته است تا رنگ و بافت پوست را درخشان، صاف و یکدست نماید.

تعداد سرعت‌های قابل تنظیم

۱

۲

۱

۱

۲

۱

تنوع رنگ‌ها



قطعات جانبی همراه با دستگاه

- دستگاه PMD پلاس
- کلاهک‌های روان‌بخش
- ۱ عدد دیسک سفید آموزشی
- ۲ عدد دیسک آبی
- ۲ عدد دیسک سبز
- ۲ عدد دیسک قرمز
- دستگاه PMD اینترنشنال پرو
- ۲ حالت سرعت
- کلاهک‌های روان‌بخش
- ۱ عدد دیسک سفید آموزشی
- ۲ عدد دیسک خاکستری
- ۲ عدد دیسک آبی
- ۲ عدد دیسک سبز
- آداپتور قابل استفاده با برق
- تمامی کشورها



- PMD اینترنشنال
- ۱ عدد دیسک سفید آموزشی
- ۲ عدد دیسک خاکستری
- ۲ عدد دیسک آبی
- ۴ عدد دیسک سبز
- آداپتور قابل استفاده با برق
- تمامی کشورها
- PMD برای آقایان
- ۲ عدد کلاهک روان‌بخش
- ۱ عدد دیسک سفید آموزشی
- ۲ عدد دیسک سبز
- ۴ عدد دیسک آبی
- ۲ عدد دیسک قرمز

- دستگاه PMD پرو
- ۲ حالت سرعت
- کلاهک‌های روان‌بخش
- ۱ عدد دیسک سفید آموزشی
- ۲ عدد دیسک خاکستری
- ۲ عدد دیسک آبی
- ۲ عدد دیسک سبز
- ۲ عدد دیسک قرمز
- دستگاه PMD کلاسیک
- ۱ عدد دیسک سفید آموزشی
- ۲ عدد دیسک خاکستری
- ۲ عدد دیسک آبی
- ۲ عدد دیسک سبز
- ۲ عدد دیسک قرمز



نحوه استفاده از پرسونال میکرودرم

دستورالعمل مختصر

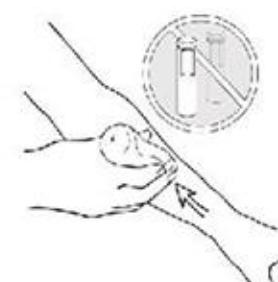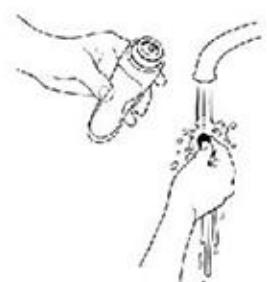

۶- پس از استفاده، کلاهک و فیلتر دستگاه را با پارچه‌ی الکلی یا صابون ضد باکتری تمیز کنید.


۵- بلافاصله پس از درمان، پوست را بشویید و خشک کنید. از تقویت‌کننده‌ی آرامش بخش و مرطوب‌کننده و ریکاوری استفاده کنید.

۴- پرسونال میکرودرم را به طور پیوسته با حرکات رو به بالا روی پوست جابجا کنید. روی هیچ نقطه‌ای مکث نکنید و سریع دستگاه را حرکت دهید.

۳- با دست آزاد خود پوست را بشویید تا پرسونال میکرودرم بتواند به راحتی و همواری روی پوست حرکت کند.

۲- با دیسک آموزشی سفید شروع به کار کنید. پیش از استفاده روی صورت، با آن روی بازو یا پای خود تمرین کنید. توصیه می‌شود از سیستم روزانه بازسازی سلوی PMD استفاده نمایید.

نکاتی برای درمان صورت

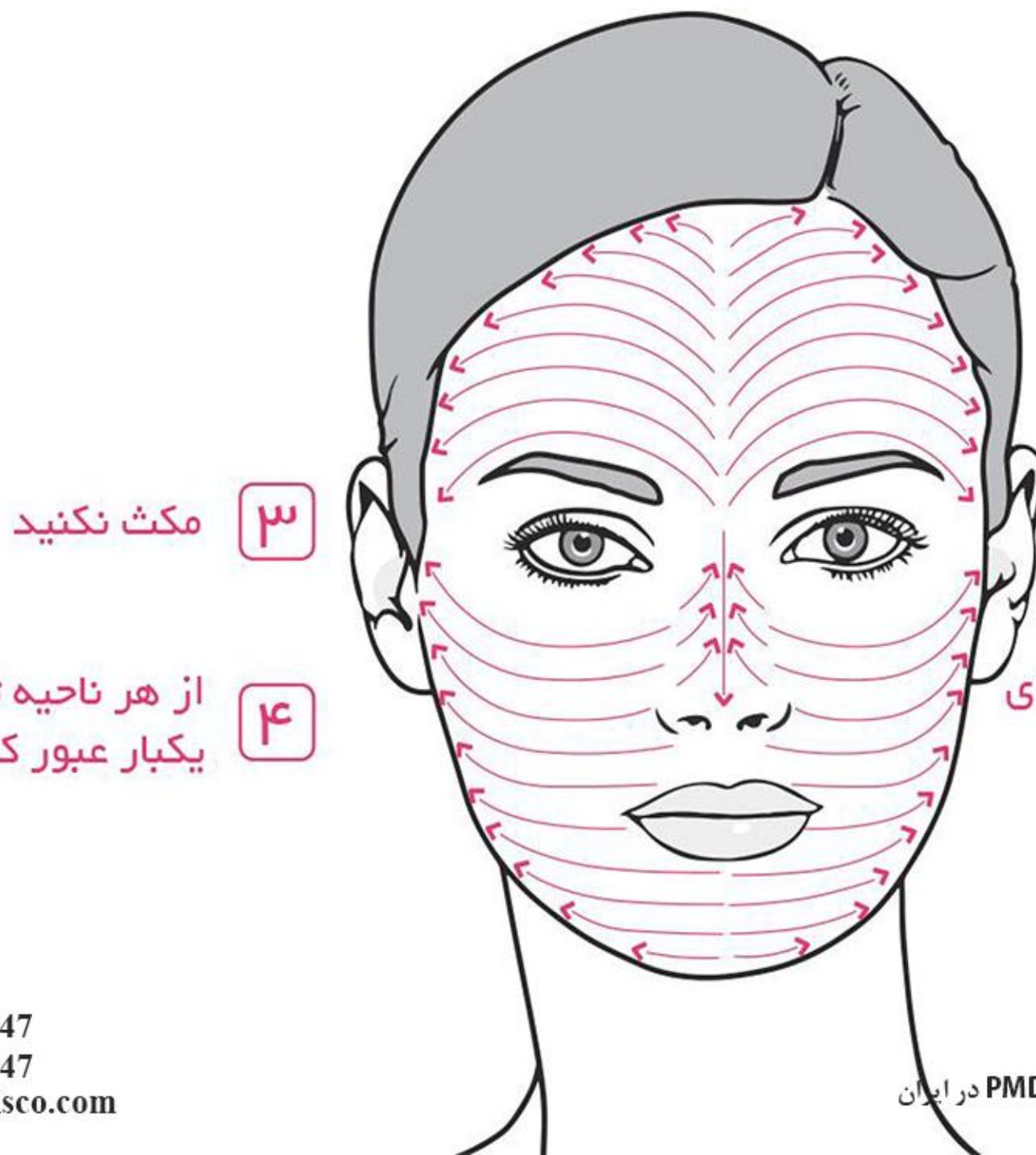

از هر ناحیه تنها یکبار عبور کنید

۳

با دیسک آموزشی سفید شروع کنید


۱

دستگاه را به سرعت روی پوست حرکت دهید

۲



انتخاب دیسک

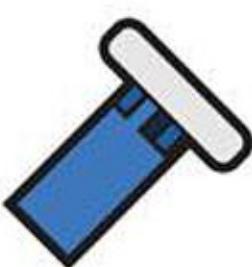

دیسک بزرگ

جهت درمان بدن



دیسک کوچک

جهت درمان صورت و نواحی

حساس بدن

در اولین درمان خود از دیسک فوق حساس سفید استفاده کنید. پیش از بکار برستن آن روی صورت خود، روی بازو یا پای خود تمرین کنید. این امر می‌تواند شما را برای استفاده از دیسک‌های قوی‌تر آماده کند. پس از درمان اول خود با دیسک سفید، ۵ الی ۷ روز صبر کنید و سپس از دیسک خیلی حساس خاکستری یا دیسک حساس آبی رنگ استفاده نمایید. پوست هر کس متفاوت است. بسته به نوع پوست خود، می‌توانید به درمان خود با دیسک آبی ادامه دهید. در غیر این صورت اگر پوستی غیرحساس دارید می‌توانید برای درمان از دیسک سبز یا حتی نارنجی و قرمز استفاده کنید. زیبایی این دستگاه در همین نکته نهفته است که به شما امکان سفارشی کردن درمان از سطح بسیار حساس تا فوق قوی را می‌دهد.

دیسک‌های قابل انتخاب




دیسک قرمز

بسیار زبر و قوی



دیسک نارنجی

زبر و قوی

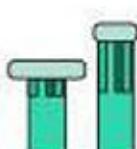

دیسک سبز

متوسط



دیسک آبی

حساس




دیسک خاکستری

بسیار حساس



دیسک سفید

فوق حساس

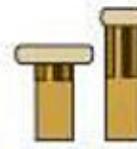

دیسک زرد

بدن قوی



دیسک سیاه

تمام بدن و پاهای

نحوه جای‌گذاری دیسک

مرحله ۱: دیسک را روی محور میله‌ای دستگاه محکم به پایین فشار دهید.

مرحله ۲: کلاهک را دور محور بچرخانید تا از محکم بودن کلاهک روی حلقه‌ی سیاه رنگ دستگاه اطمینان حاصل کنید.

مرحله ۳: مطمئن شوید دیسک کمی زیر کلاهک پلاستیکی قرار گرفته است.



برای حصول بهترین نتایج، دیسک‌ها را پس از هر ۳ الی ۴ درمان عوض کنید. بلورهای آلومینیوم اکسید که موجب لایه‌برداری پوست شما می‌شوند، فرسایش می‌یابند. میزان ماندگاری هر دیسک را طول مدت هر درمان و نوع پوست مشخص می‌کند. فراموش نکنید که درمان خود را به دلخواه و بر مبنای نوع پوست تان سفارشی کنید و از پرسونال میکرودرم نه تنها برای صورت، بلکه برای سایر نقاط بدن خود نیز استفاده نمایید.

نظافت و نگهداری

مرحله ۱: کلاهک و دیسک را با الکل و یا آب گرم تمیز کنید.

مرحله ۲: فیلتر را با عبور جریان آب گرم از روی آن و مالش آن بین انگشتان دست تمیز کنید.

مرحله ۳: همواره به خاطر داشته باشید که فیلتر را مجدداً در دستگاه قرار دهید.

لیست بایدها و نبایدها

به خاطر داشته باشید که پوست هر شخص متفاوت است. دستورالعمل را به عنوان راهنمای کلی به کار بندید زیرا مراقبت اختصاصی از پوست شما نیازمند سفارشی کردن کامل درمان‌هایتان می‌باشد.

نبایدها

۱. تا ۴۸ ساعت قبل و بعد از استفاده از پرسونال میکرودرم، از هیچ درمان مراقبت پوستی نظیر محصولات لایه‌بردار شیمیایی (هیدروکسی اسید آلفا و بتا، رتین آ یا رتینول) استفاده نکنید. عقل سلیم حکم می‌کند که در هیچ کاری زیاده روی نکنید.
۲. اگر اکوتان مصرف می‌کنید، بدون مشاوره با متخصص خود از پرسونال میکرودرم استفاده نکنید.
۳. اگر هرگونه مشکل جدی پوستی دارید، اگر پوستی فوق العاده حساس دارید یا اگر دارویی مصرف می‌کنید که پوست تان را تحت الشعاع قرار می‌دهد بدون مشاوره با متخصص خود از پرسونال میکرودرم استفاده نکنید.

بایدها

۱. پیش از شروع اولین درمان، ویدئو آموزشی را تماشا کنید و تمامی دستورالعمل‌ها را بخوانید. تمرین روی بازو یا ساق پا را قبل از شروع درمان صورت را به خاطر بسپارید.
۲. پوست را به خوبی بشویید تا از هر گونه مواد آرایشی، چربی‌ها، لوسيون‌ها و آلدگی‌ها کاملاً پاک شود. توصیه‌ی ما استفاده از کلینیزر تسکین‌بخش پیشرفته است.
۳. از خشک بودن پوست قبل از شروع درمان اطمینان حاصل کنید.
۴. با یک دست یا انگشت پوست تان را بکشید تا پرسونال میکرودرم بتواند به راحتی و همواری روی پوست حرکت کند. دستگاه را سریع حرکت دهید.
۵. اولین درمان خود را با دیسک آموزشی سفید آغاز کنید. سپس بسته به نوع پوست خود، تا دیسک خاکستری، پس از آن آبی، و سپس در صورت لزوم

۴. از پرسونال میکرودرم مستقیما برای درمان بالای حدقهی چشم یا زیر استخوان ابرو استفاده نکنید. پوست شما در این نواحی سست و نازک است. از درمان این نواحی اجتناب کنید.
۵. نگذارید دستگاه روی نقطه‌ای از پوست شما مکث کند. اگر چنین اتفاقی افتاد وحشت نکنید. ممکن است دچار سرخی و زخم شوید. تنها کافی است از یک مرطوب‌کننده و ریکاوری و ضدآفتاب خوب استفاده کنید. پس از گذشت چند روز، پوستی نو و جوان خواهد داشت.
۶. پرسونال میکرودرم را روی یک قسمت از پوست چند بار استفاده نکنید. اثرات دستگاه همیشه بلافاصله قابل مشاهده نیستند و لذا باید در این مورد محتاطانه عمل کنید. پس از چند مرتبه استفاده، یاد می‌گیرید که چگونه هر درمان را به بهترین نحو و مناسب با نوع پوست خود انجام دهید.
۷. اگر هرگونه دردی در حین درمان احساس می‌کنید، درمان خود با پرسونال میکرودرم را متوقف کنید. درد علامت این است که شما با پوست خود بسیار تهاجمی رفتار کرده‌اید. ممکن است دستگاه را روی قسمتی از پوست نگهداشته باشید، آن را خیلی آهسته روی پوست حرکت داده باشید، و یا از یک قسمت چندین بار عبور کرده باشید. از هر درمان بیاموزید که چگونه باید مناسب با پوست خود، درمان‌ها را سفارشی کنید.

- دیسک سبز یا قرمز برای قوی‌ترین شدت درمان پیش روید. به خاطر داشته باشید که هر نوع پوستی متفاوت است. درمان را با سرعت خود پیش بگیرید.
۶. اگر پوست بسیار حساسی دارید، پس از تمرین کار با پرسونال میکرودرم روی بازو یا ساق پایتان، به ناحیه گردن بروید. قبل از پیش روی در درمان، ۳ الی ۴ دقیقه صبر کنید تا ببینید آیا پوست‌تان واکنشی از خود نشان می‌دهد یا خیر.
۷. همواره در حال انجام درمان به حرکت دادن دستگاه روی پوست ادامه دهید.
۸. از دیسک کوچک برای صورت و از دیسک بزرگ برای سایر بدن استفاده کنید.
۹. مطمئن شوید که دیسک کمی پایین‌تر از سر کلاهک قرار دارد. بدین منظور پس از این که کلاهک در جای خود قرار گرفت دیسک را به پایین فشار دهید. از دیسک کوچک به همراه کلاهک بزرگ استفاده نکنید.
۱۰. روزانه از ضدآفتاب استفاده کنید.
۱۱. هر ۶ الی ۷ روز درمان خود را تکرار کنید. این امر موجب می‌شود که پوست زمان کافی برای جوانسازی خود داشته باشد. در حین درمان، پوست مرده را از بین می‌برید. طی ۶ الی ۷ روز آتی، پوست شما ریکاوری می‌شود و سلول‌های جدید پوستی رشد می‌کنند.
۱۲. کلاهک، دیسک و فیلتر را با الکل و یا مایع ضدباکتری تمیز کنید و بگذارید خشک شوند.

تحولی زیبا و دوستداشتمنی

تنها با ۸ الی ۱۲ جلسه درمانی رنگ و بافت پوست شما شفافتر، صاف‌تر و یکنواخت‌تر می‌شود! همچنین با تداوم در درمان، شاهد کاهش در بروز خطوط ریز، چروک، جوش‌ها، و منافذ درشت پوستی خواهید بود.

نتایج کلینیکی



جوش‌ها و رنگ پوست

دستگاه پرسونال میکرودرم از یک دیسک چرخان انحصاری با کریستال‌های اکسید آلومینیوم بهره می‌برد تا سلول‌های مرده و راکد را از سطح پوست لایه‌برداری کند. با از بین بردن این موائع و سلول‌های مرده، فرایند رشد سلول‌های جدید تحریک شده و پوستی جوان، درخشان و لطیف را نمایان می‌سازد.



بافت پوست

پرسونال میکرودرم شامل یک ساکشن واکیوم کالیبره شده‌ی فوق‌العاده است، و این تکنولوژی منحصر‌بفرد جریان خون را به سطح پوست می‌کشاند و درنتیجه میزان جریان و گردش خون در سطح پوست را افزایش می‌بخشد. این ساکشن فرایند طبیعی ترمیم را در بدن برانگیخته می‌نماید که در نهایت به تولید کلاژن و الاستین و افزایش استحکام و درخشندگی پوست منجر می‌شود.



کاهش بروز خطوط ریز و چروک‌ها

پرسونال میکرودرم، با بهره‌گیری از تکنولوژی انحصاری دیسک چرخان بدون هیچ زحمتی موائع و سلول‌های مرده و راکد پوست را از بین می‌برد. همین که این موائع حذف شدند، محصولات مراقبت پوستی کاملاً جذب سطح پوست می‌شوند. به این ترتیب، مزایای حاصل از محصولات مراقبت پوستی به بیشترین میزان خود می‌رسد تا به بازسازی و به کمال رساندن پوست شما کمک کند و آن را نرم و لطیف، روشن، شفاف و درخشان نماید.



کاربران واقعی؛ نتایج واقعی



«من از نتایجی که عایدم شده فوق العاده خوشحالم!»



«من تنها فاندیشن می‌زنم و هر چه می‌گذرد پوستم صاف‌تر می‌شود! PMD واقعاً روی پوست، زندگی، و اعتماد بنفسم تأثیر مثبتی داشته است! هرچه از این محصول بگوییم کم است!»



Before

After

«هیچ وقت پوست من به این صافی نبوده است!»



Before

After

«تغییر شگرفی در پوستم ایجاد شده! منافذ پوستی‌ام دیگر مثل سابق قابل مشاهده نیستند! بالاخره یک چیز پیدا کردم که واقعاً کار کند!»

نظر کاربران

«واقعاً آنقدر به تأثیر مثبت پیامدی و تغییری که روی چهره‌ام ایجاد می‌کند ایمان دارم! دیگر هرگز کسی از روی چهره‌ام سنم را نخواهد فهمید!!!!»

کانی گرونینگ

«من این محصول را به همه توصیه می‌کنم! کار کردن با آن خیلی راحت‌تر از چیزی بود که فکرش را می‌کردم؛ پوستم عاشق PMD شده است!»

لدونا دنیس



«در تعجبم که چرا من این همه وقت پولم را هدر می‌دادم و هر دو بار یک بار برای درمان حرفهای به کلینیک می‌رفتم؛ در حالی که می‌توانستم یکی از این دستگاه‌های دوست‌داشتنی را برای خودم داشته باشم؟!؟ من که عاشقشم!»

داماریس

«اگر قصد دارید به بهترین نحو ممکن پوستان را جوانسازی کنید، با سیستم پرسونال میکروردم PMD از درمان میکروردم ابریژن با کیفیت دستگاه‌های کلینیکی آن هم درست در خانه‌ی خودتان بهره‌مند شوید.»

در نقد و بررسی‌ها، کاربران این دستگاه «شگفت‌انگیز» را «راز جدید زیبایی» خود می‌دانند.

Total Beauty.com

«ممکن است کلیشه‌ای به نظر برسد، اما پوستم خیلی تمیزتر و سالم‌تر به نظر می‌رسد. حتی خواهرم می‌گوید که رنگ و لعاب صورتم هم بیشتر شده است... از شنیدن این حرف واقعاً کیف کردم!»

الودی روسو

«با برگشتن سلامت و لطافت به پوستم، اعتماد بنفس هم به من برگشت، و این نتایج را در مدت زمان کوتاه و بدون هیچ عارضه‌ی جانبی‌ای بدست آوردم.»

جوانا اسمیت

«اکنون دیگر این محصول تمام فکر و ذکر من شده!»

شلی ون ویتسنبرگ

«باورتان نمی‌شود که استفاده از این دستگاه چقدر آسان بودا هر هفته که از آن استفاده می‌کردم، بهبود مستمری روی پوستم مشاهده می‌کردم.»

جنیفر مدیراس



آمیتیس تجارت ماندگار
نمایندگی انحصاری محصولات **PMD** در ایران

02188614547

02188051347

www.amitisco.com