

جدول رنگ پوست

ابتدا رنگ پوست خود را بررسی کنید تا دریابید که آیا استفاده از لیزر تریا برای شما مناسب هست یا نه. رنگ پوست ناحیه‌ی درمان را با جدول زیر تطبیق بدهید. اگر رنگ پوست‌تان مطابق ناحیه‌ی امن جدول نبود از لیزر استفاده نکنید.



طیف رنگ‌های ناایمن:



برای استفاده در نواحی:

پاها؛ بازوها، خط بیکینی؛ زیربغل‌ها؛ دست‌ها؛ سینه؛ پشت؛ شکم؛ موهای صورت خانم‌ها (از خط گونه به پایین)

پیش از استفاده

دستورالعمل‌های زیر را بخوانید

این کتابچه را برای بدست آوردن اطلاعات مهم زیر مطالعه بفرمایید:

- بررسی کنید که لیزر تریا برای شما ایمن باشد.
- روش استفاده از لیزر را یاد بگیرید.
- تایم‌لاین نتایج درمان ما را مشاهده بفرمایید.
- نکات پیشنهادی ما برای نتایج بهتر را مطالعه کنید.
- موارد منع استفاده و هشدارها را در نظر داشته باشید.

توصیه می‌کنیم که این دستورالعمل‌ها را برای مراجعات بعدی پیش خود نگاه دارید. اگر پرسش یا دلنگرانی خاصی داشتید، لطفاً با بخش پشتیبانی تریا بیوتی تماس بگیرید

tria

لیزر از بین‌برنده‌ی موهای زائد تریا ۴X

کتابچه‌ی راهنما

شیوهی کار لیزر موهای زائد تریا

لیزر تریا 4X فولیکول‌های درون پوست که کارشان تولید موهای جدید است را از کار می‌اندازد و آن را غیرفعال می‌سازد. روش کار اینگونه است که لیزر پالسی از پرتو لیزر را گسیل می‌کند، که رنگدانه‌های تیره‌ی درون مو را در معرض گرمای شدید قرار می‌دهد و از این راه، فولیکول مو را غیرفعال می‌نماید. به همین خاطر است که نتایج این نوع درمان دائمی هستند و تنها بر روی موهایی که به طور طبیعی قهوه‌ای یا سیاه باشند اثر می‌گذارد.

برای اینکه این لیزر بیشترین اثرگذاری ممکن را داشته باشد، باید هر فولیکول مو در طول دوره‌ی فعال رشد خود مورد درمان قرار بگیرد. فرایند رشد موها سیکل‌ها و دوره‌های مشخصی دارد، به همین دلیل لازم است که درمان چندین بار تکرار شود. برای حصول بهترین نتیجه، هر دو هفته به مدت سه ماه یا تا زمانی میزان کاهش موهای زائد برای خودتان رضایت‌بخش باشد، درمان را ادامه دهید.

لیزر تریا 4X جدیدتان را به شما

تبریک می‌گوییم

لیزر خانگی از بین‌برنده‌ی موهای زائد تریا 4X، بر خلاف روش‌های موقتی و زودگذری چون شیو کردن و موم انداختن، نتایجی دائمی به ارمغان می‌آورد. شیوه‌ی کار لیزر از بین‌برنده‌ی موهای زائد تریا 4X درست مانند لیزرهای تخصصی و کلینیکی است. این لیزر، به جای خود مو، فولیکل مو را هدف می‌گیرد، و بدین ترتیب، پس از چند بار تکرار درمان، موجب کاهش دائمی موهای شما می‌گردد.

بیایید شروع کنیم!

با قسمت‌های مختلف لیزر تریا 4X آشنا بشوید

لیزر تریا 4X

نمایشگر

در طول درمان شما را راهنمایی می‌کند

روزنه‌ی درمان

در حین درمان نور لیزر از اینجا گسیل می‌شود

سوکت شارژر

شارژر باتری را به آن سه‌ت متصا . کند

حسگر پوستی

یک ویژگی امنیتی است که قفل دستگاه را غیرفعال می‌کند

زیر دستگاه

نمایشگر

قفل

اگر از لیزر تریا استفاده نکنید به طور خودکار قفل می‌شود. برای باز کردن قفل از حسگر پوستی استفاده کنید.

نشانگر باتری

نشان دهنده‌ی میزان شارژ باتری است وقتی باتری نیاز به شارژ داشته باشد چشمک می‌زند.

پالس‌شمار

تعداد پالس‌ها در یک جلسه‌ی درمان را می‌شمارد

سطح درمان

تنظیمات سطح انرژی لیزر تریا

نشانگر حسگر پوستی

نشان می‌دهد که حسگر پوستی برای استفاده آماده است

دکمه‌ی خاموش / روشن

سطح درمان را تنظیم می‌کند و لیزر را خاموش یا روشن می‌کند.

شارژر باتری

لیزر تریا را شارژ می‌کند. در حین اتصال به برق لیزر تریا کار نخواهد کرد.



کسانی که نباید از لیزر تریا 4X استفاده کنند (موارد منع مصرف)

از لیزر تریا استفاده نکنید، اگر به سن قانونی نرسیده‌اید، همچنین از بکار بردن آن روی اشخاصی که زیر سن قانونی هستند خودداری کنید. هنوز مطالعه‌ای درباره‌ی استفاده از لیزر تریا روی کودکان انجام نشده و بالقوه می‌توان به خطرات جدی منجر گردد.

از لیزر تریا استفاده نکنید، اگر رنگ موی شما روشن، یعنی، بلوند، سفید، خاکستری، یا قرمز است. برای مؤثر بودن این درمان، لازم است که موی ناحیه‌ی درمان به طور طبیعی قهوه‌ای یا تیره باشد. رنگدانه‌های روشن‌تر مو آنقدر انرژی جذب نمی‌کنند تا بتوانند فولیکول مو را از کار ببندازند.

از لیزر تریا استفاده نکنید، اگر رنگ پوست شما با یکی از رنگ‌های قسمت «نا ایمن» جدول رنگ پوست تطابق دارد. اگر رنگ پوست شما برای این نوع درمان «نا ایمن» باشد، ممکن است پوست بیش از حد مجاز انرژی لیزر را به خود جذب کنند و دچار آسیب گردد (سوختگی، تغییر رنگ یا اثر زخم)

لطفاً توجه داشته باشید: حسگر پوستی یک ویژگی امنیتی لیزر تریا 4X است که در صورت لزوم قفل دستگاه را فعال می‌سازد. اگر استفاده از لیزر تریا برای شما ایمن نباشد، به هیچ وجه قادر نخواهید بود قفل آن را توسط حسگر پوستی غیرفعال کنید.

موارد استفاده‌ی لیزر تریا 4X

لیزر از بین‌برنده‌ی موهای زائد تریا برای زدودن موهای زائد و ناخواسته بکار می‌رود. این لیزر، که بدون نیاز به نسخه‌ی پزشک می‌توان آن را تهیه کرد، برای درمان دائمی موهای زائد، به طور دوره‌ای، به موازات شیو کردن در نظر گرفته شده است. به علاوه، هدف دیگر این لیزر کاهش دائمی رشد مجدد موهای زائد است که بر حسب کاهش پایدار و درازمدت تعداد موهای زائد رشد کرده در طول شش، نه و دوازده ماه پس از تکمیل دوره‌ی درمان تعریف می‌شود.

در نهایت، این لیزر برای استفاده روی پوست‌های با رنگ روشن تا متوسط (به جدول رنگ پوست در همین کتابچه مراجعه نمایید) و موهایی که رنگ طبیعی آن‌ها قهوه‌ای یا سیاه است در نظر گرفته شده است. بالطبع، این درمان روی موهای سفید، خاکستری، روشن یا قرمز اثری ندارد.

مزایا و خطرات احتمالی

پژوهشی کلینیکی که تحت نظارت پزشکان انجام گرفته نشان داده است که لیزر تریا 4X در صورت استفاده‌ی هدفمند امن و اثرگذار است.

هفتاد و نه کاربر در طول یک دوره‌ی درمانی شش هفته‌ای (سه جلسه) مورد مطالعه قرار گرفتند و تمامی عوارض جانبی این درمان به دقت مورد بازبینی قرار گرفتند. تعداد موها در هر ناحیه‌ی درمان پیش از هر جلسه و در فواصل زمانی یک ، دو، سه، شش و دوازده ماه پس از آخرین جلسه‌ی درمان به طور دقیق شمارش شدند. پس از سومین جلسه هیچ درمان اضافه‌ای صورت نگرفت.

مزایا

لیزر تریا در صورت استفاده‌ی هدفمند و مستقیم قادر است نتایج دائمی به دست بدهد. نتایج حاصله بسته به اینکه کدام ناحیه‌ی بدن مورد درمان قرار می‌گیرد و یا دستورالعمل‌ها با چه دقتی دنبال می‌شوند ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد. در ضمن این بررسی کلینیکی نتایج زیر به اثبات رسید:

- ✓ ۶۱٪ کاهش متوسط تعداد موهای زائد سه هفته پس از نخستین درمان.
- ✓ ۷۰٪ کاهش متوسط تعداد موهای زائد سه هفته پس از دومین درمان.
- ✓ ۶۰٪ کاهش متوسط تعداد موهای زائد یک ماه پس از سومین درمان.
- ✓ ۶٪ کاهش متوسط تعداد موهای زائد سه ماه پس از سومین درمان.
- ✓ ۳۳٪ کاهش متوسط تعداد موهای زائد دوازده ماه پس از سومین درمان.

در این پژوهش، ۶۹ نفر از ۷۹ کاربر (۸۷٪) گزارش دادند که موهای‌شان در طول یک ماه پس از آخرین درمان نسبت به قبل از درمان نازک‌تر شده است. و ۵۵ نفر از ۷۹ کاربر (۷۰٪) گزارش دادند که در همین مدت موهایشان روشن‌تر شده است.

این نتایج تنها با انجام سه جلسه‌ی درمان بدست آمد. برای کسب نتایج بهتر هر دو هفته به مدت سه ماه یا تا زمانی که خودتان از میزان کاهش موها رضایت حاصل نمایید درمان را ادامه دهید.

خطرات ممکن

مهم است که از لیزر تریا به درستی استفاده کنید. همه‌ی هشدارها را جدی بگیرید. حسگر پوستی مانع از کاربرد لیزر روی نوع پوست‌هایی می‌گردد که مناسب این نوع درمان نیستند. اگر از لیزر تریا 4X به عنوان درمان مستقیم استفاده می‌کنید خطرات احتمالی زیر متصور می‌باشد:

در پژوهش انجام شده، تقریباً تمامی کاربران آثاری از ناراحتی یا دردی اندک و ملایم در نخستین درمان داشتند که در درمان‌های بعدی از حساسیت آن کاسته شد. این مورد طبیعی است. ممکن احساس گرما، کمی سوختگی، یا خارش داشته باشید. برخی احساس‌شان را همچون کشیده شدن یک نوار لاستیکی روی پوست توصیف کردند. اگر درد شما قابل تحمل نبود یا بعد از درمان هم ادامه یافت، درمان را متوقف کنید و با دکتر خود مشورت نمایید.

ممکن است پوست شما تا ۲۴ ساعت پس از درمان قرمز بشود. این قرمزی عموماً در طی چند ساعت از بین می‌رود. اگر این مدت به دو یا سه روز افزایش یافت، درمان را متوقف کنید و با دکترتان مشورت بفرمایید.

در موارد نادری، بعضی از کاربران بعد از درمان اولیه متوجه افزایش تعداد موهای ناحیه‌ی درمان شدند. اگر این افزایش پس از چند جلسه همچنان ادامه یافت درمان را متوقف کنید و با دکتر خود مشورت نمایید.

همچنین موارد زیر در میان کاربران آزمایش شده گزارش نشده (۰ نفر از ۸۸ کاربر) اما در مورد لیزرهای دیگر گاهی مشاهده شده است:

ورم پوست، به ویژه در اطراف ریشه‌ی مو. اگر در مدت دو تا سه روز بر طرف نشد، درمان را متوقف و با دکترتان مشورت نمایید.

تغییر رنگ موقتی یا دائمی. در هر صورت درمان را متوقف و با دکترتان مشورت نمایید.

تاول. در مورد پوست‌های با رنگ روشن تا متوسط، این مشکل بسیار نادر است. با این همه، اگر دچار این مشکل شدید درمان را متوقف کنید و نگذارید تاول‌ها عفونی شوند. در صورت لزوم با پزشک خود مشورت نمایید.

مروری بر درمان با لیزر تریا 4X

پیش از اولین جلسه درمان

- شش هفته پیش از درمان، وکس کردن یا چیدن مو با موچین را متوقف کنید.
- دست‌کم یک روز پیش از درمان، لیزر را روی پوست خود تست کنید.

پیش از هر درمان

- دستگاه لیزر تریا 4X خود را شارژ کنید.
- آن را از شارژر باتری جدا نمایید.
- پوست‌تان را بشوئید، شیو کنید و خشک نمایید.
- لیزر تریا را روشن کنید.
- از طریق حسگر پوستی قفل لیزر را باز کنید.
- سطح درمان را تنظیم کنید.

درفاصله‌ی دو درمان

- شیو کنید، اما از وکس کردن یا چیدن موها با موچین خودداری نمایید.

تا پایان درمان را ادامه دهید

- مداومت داشته باشید و دستورالعمل‌ها را به دقت دنبال کنید.
- برای حصول بهترین نتیجه‌ی ممکن، هر دو هفته یکبار به مدت سه ماه و یا تا زمانی که نتیجه‌ی مطلوب‌تان را مشاهده نمایید درمان را ادامه دهید.

نتایج مورد انتظار

در حین استفاده از لیزر تریا 4X

- کیفیت احساس در افراد مختلف و بسته به ناحیه یا سطح شدت درمان متفاوت است. بعضی کاربران ممکن است احساسی شبیه به کشیده شدن یک نوار لاستیکی روی پوست‌شان داشته باشند. دیگران گاهی احساسی شبیه به گرما یا خارش دارند.
- به موازات کم شدن موها در ناحیه‌ی درمان از شدت این احساس نیز کاسته می‌شود. به همین دلیل، پس از چند جلسه درمان اولیه می‌توانید سطح درمان را بالا ببرید.
- بعضی از کاربران یک قرمزی سطحی و ملایم را روی پوست خود تجربه می‌کنند که در طول ۲۴ ساعت کاملاً برطرف خواهد شد.

در طول سه ماهه‌ی نخست درمان

- پس از نخستین درمان هیچ تغییر محسوسی در موهای شما پدید نخواهد آمد. درمان لیزری موهای زائد موجب زائل شدن فوری موهای زائد نمی‌گردد.
- با افزایش تعداد درمان‌ها، تعداد موهای زائد با هر درمان تدریجاً کاهش می‌یابد.
- همچنین موهایی که مجدداً رشد کرده‌اند، این‌بار روشن‌تر و نازک‌تر خواهند بود.

پس از سه ماه درمان

- فولیکول‌های مویی که توسط لیزر تریا 4X غیرفعال شده‌اند دیگر رشد نخواهند کرد.
- در صورت لزوم می‌توانید دوره‌ی درمان را ادامه دهید و یا همچنان گاه‌گذاری از لیزر استفاده کنید.


پیش از نخستین درمان

لیزر تریا 4X را شارژ کنید

دست کم دو ساعت پیش از استفاده و یا هر زمان که نشانگر باتری به نشانه‌ی خالی بودن چشمک‌زن شده بود لیزر تریا را شارژ کنید. اگر قصد دارید ناحیه بزرگی از بدن را درمان کنید و یا لیزر را روی سطح بالایی تنظیم نمایید ممکن است لازم شود در میانه‌ی درمان نیز لیزر را مجدداً شارژ نمایید. این امر کاملاً طبیعی است.

جهت شارژ دستگاه

۱. شارژر باتری را از یک طرف به سوکت شارژ تریا و از طرف دیگر به پریز برق متصل کنید.
 ۲. نشانگر باتری در حین شارژ دستگاه علامت «در حال پر شدن» را نشان خواهد داد.
 ۳. به محض شارژ کامل چراغ باتری ثابت شده و می‌توانید دستگاه را از برق بکشید. لیزر تریا می‌تواند بدون آسیب ساعت‌ها بعد از شارژ شدن به برق متصل بماند
- توجه:** برای جلوگیری از آسیب دیدن لیزر از شارژر باتری مخصوص آن استفاده کنید. در صورت مفقود شدن یا امور مشتریان تماس بگیرید.

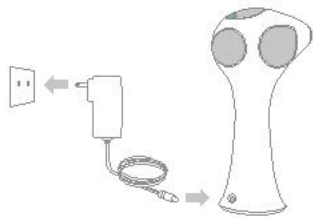

توجه: می‌توانید لیزر را در حالت ساکت شارژ کنید (شارژ شدن بدون صدای فن خنک کننده)، اما این زمان بیشتری خواهد برد. برای تغییر حالت‌های شارژ، دکمه‌ی پاور را در حین شارژ شدن فشار دهید.

لیزر را روی یک ناحیه‌ی کوچک از پوست امتحان کنید

توصیه می‌شود پیش از درمان هر ناحیه‌ی جدید نخست لیزر تریا را روی قطعه‌ی کوچکی از آن ناحیه امتحان نمایید و سطوح مختلف انرژی لیزر را در آن ناحیه بررسی کنید.

۱. پوست خود را آماده کرده و قفل لیزر را باز کنید. لیزر تریا روی سطح یک تنظیم خواهد شد.
۲. روزنه‌ی درمان را صاف در مقابل پوست خود بگیرید و یک پالس لیزر را روی آن امتحان کنید.
۳. اگر سطح یک برای تان قابل تحمل بود، به ناحیه‌ی دیگری بروید، سطح درمان را روی دو تنظیم کنید و یک پالس روی این ناحیه جدید امتحان نمایید. برای تنظیم سطح درمان از دکمه‌ی پاور استفاده کنید.
۴. اگر سطح دو برای تان قابل تحمل بود، ناحیه‌ی آزمون را تغییر داده و سطح درمان را یک درجه بالا ببرید تا زمانی که به بیشترین سطح قابل تحمل دست بیابید.
۵. ۲۴ ساعت صبر کنید و آنگاه نواحی آزمون را بررسی کنید. اگر حالت ظاهری پوست نرمال بود، اولین درمان خود را با بالاترین سطح درمان بدست آمده شروع کنید.

اگر رنگ پوست‌تان دچار تغییرات حاد و شدید شد (به خاطر برنزه کردن) دوباره لیزر را روی پوست امتحان کنید.

⚠️ اگر متوجه هرگونه تاول، سوختگی، تغییر رنگ پوست، یا دیگر عوارض جانبی مشابه شدید، یا در صورتی که از نتایج آزمون لیزر مطمئن نیستید، از لیزر تریا 4X استفاده نکنید. با بخش امور مشتریان تریا و یا پزشک خودتان تماس بگیرید.


پوست خود را آماده سازید

۱. ناحیه درمان را پاک کنید، تمامی مواد آرایشی، لوسیون‌ها و کرم‌هایی که ممکن است راه نور لیزر را مسدود کنند از روی پوست بزدایید.
۲. ناحیه‌ی درمان را با تیغ اصلاح کنید. این امر موجب از بین رفتن موهای روی سطح پوست می‌شود و در نتیجه نور لیزر بهتر می‌تواند به موهای درون فولیکل نفوذ کند.
۳. ناحیه درمان را خشک نمایید.

قفل لیزر را باز کنید

هنگامی که از لیزر تریا 4X استفاده نمی‌شود، قفل می‌ماند. جهت قفل‌گشایی لیزر تریا 4X از حسگر پوست استفاده نمایید. این حسگر تایید می‌کند که لیزر 4X با رنگ پوست شما سازگار است و استفاده از آن امن است؛ در نتیجه قفل دستگاه لیزر شما باز می‌شود.

۱. لیزر تریا 4X را از شارژر جدا کنید و دکمه‌ی خاموش/روشن را بفشارید تا دستگاه روشن شود. صفحه‌ی نمایشگر نشانه‌های قفل و حسگر پوست را نشان خواهد داد.

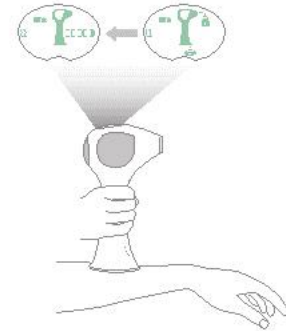


۲. حسگر پوست (چراغ قرمز زیر لیزر تریا 4X) را روی پوست محلی که می‌خواهید درمان کنید نگه دارید. حسگر پوست به طور خودکار پوست شما را بررسی می‌کند. اگر لیزر تریا 4X برای رنگ پوست شما بی‌خطر باشد، دستگاه‌تان بوق می‌زند و قفل آن باز می‌شود.
۳. اگر علامت قفل همچنان دیده می‌شد و صدای بوقی از دستگاه نشنیدید، ممکن است استفاده از دستگاه برای شما امن نباشد. یا ممکن است از حسگر پوست به درستی استفاده نکرده باشید و لازم باشد مجدداً آن را بکار بگیرید. بدین منظور، حسگر پوست را از روی پوستتان بلند کنید و مرحله‌ی ۱ و ۲ را تکرار کنید. اگر همچنان قادر به قفل‌گشایی لیزر تریا 4X نیستید، لطفاً با نمایندگی تریابیوتی تماس حاصل فرمایید.

سطح درمان را تنظیم کنید

لیزر تریا 4X دارای درجات مختلف انرژی است. در یک تحقیق کلینیکی، درجات بالاتر ۲ تا ۳ برابر موثرتر گزارش شدند. لذا برای حصول بهترین نتایج توصیه می‌کنیم از بیشترین درجه‌ای که می‌توانید تحمل کنید استفاده کنید.

هنگامی که لیزر تریا 4X روشن است و قفل آن باز شد، دکمه‌ی روشن/خاموش را فشار دهید تا درجه‌ی مورد نظر خود را انتخاب کنید. هر بار که دکمه‌ی خاموش/روشن را فشار دهید، درجه شدت انرژی افزایش پیدا می‌کند. همین که لیزر تریا 4X به بیشترین درجه برسد، با فشردن دکمه‌ی خاموش/روشن به کمترین درجه شدت باز می‌گردد.

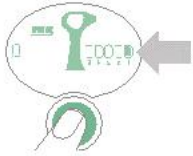

روش درمان

۱. لیزر روشن کنید ، قفل آن را باز کرده و سطح درمان را تنظیم کنید




۲. دریچه‌ی درمان را روی پوست خود قرار دهید و آن را تا هنگام شنیدن دو صدای بوق نگه دارید.

اگر شما صدای بوقی نمی‌شنوید، مطمئن شوید که دریچه درمان در تماس کامل با پوست شماست. لیزر تنها هنگامی پالس می‌زند که تمام دریچه روی پوست شما قرار گرفته باشد.

اگر شما بجای بوق دوم، صدای بوق ناهنجاری را شنیدید بدین معناست که دستگاه را پیش از اتمام پالس از روی پوست برداشته‌اید.

دریچه درمان را بین اولین و دومین بوق جابجا نکنید؛ این امر موجب اختلال در پالس لیزر می‌گردد و اثر آن کاهش می‌دهد.


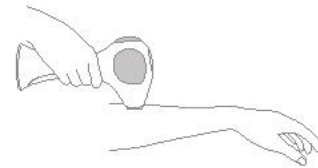


۳. لیزر را بردارید و آن را روی ناحیه‌ی مجاور پوست قرار دهید به نحوی که با ناحیه‌ی قبلی همپوشانی داشته باشد.

در هر تغییر مکان دریچه درمان، آن را به اندازه نصف قطر دریچه درمان (حدود ۵ میلیمتر) جابجا کنید.

این کار یک الگوی همپوشان در ناحیه درمان ایجاد می‌کند و تضمین می‌کند که شما لیزر را به تمامی فولیکول‌های آن ناحیه تابانده‌اید. بدین منظور لیزر شما بایستی در هر ۱۰ متر مربع، ۴۰ پالس بزند.

! یک نقطه را چندین بار درمان نکنید. همواره پس از هر پالس لیزر، دریچه درمان را به ناحیه جدیدی حرکت دهید. عدم رعایت این نکته ممکن است موجب آسیب و سوختگی پوست شود.

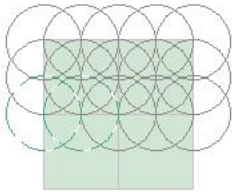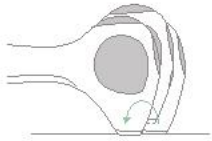

۴. درمان را تا پوشش کامل ناحیه‌ی مورد نظر ادامه دهید.

از شمارشگر پالس لیزر تریا 4X برای رسیدن به بهترین نتایج کمک بگیرید. جدول زیر تعداد پالس‌هایی که برای پوشش هر ناحیه در هر درمان مورد نیاز است را نشان می‌دهد. این اعداد تقریبی هستند و تعداد پالس‌های واقعی موردنیاز شما ممکن است متفاوت باشد.

همواره از دستورالعمل‌ها و هشدارهای درون دفترچه راهنما پیروی کنید.

توجه: هنگامی که از لیزر تریا برای درمان نواحی بزرگتر نظیر ساق پاها و پشت بدن استفاده می‌کنید، ممکن است به بیش از ۶۰۰ پالس برای پوشش کامل آن ناحیه نیاز داشته باشید. در اینصورت، لطفا لیزر تریا 4X را مجدداً شارژ کنید و درمان را تا هنگام پوشش کامل ناحیه مورد نظر ادامه دهید.

۵. دکمه‌ی پاور را به پایین فشار دهید و نگه دارید تا لیزر خاموش شود.

درمان را هر دو هفته یکبار به مدت ۳ ماه یا تا هر زمانی که به نتایج مطلوب برسید تکرار نمایید.

جدول راهنمای شمارشگر پالس

ناحیه‌ی بدن	تعداد تقریبی پالس برای هر درمان	زمان تقریبی به دقیقه
زیربغل‌ها	۱۰۰ برای هر طرف	۴-۵ برای هر طرف
بیکینی	۲۰۰ برای هر طرف	۸-۱۰ برای هر طرف
پشت لب	۲۵	۲-۳
بالای پا	۶۰۰ برای هر طرف	۲۵-۳۰ برای هر طرف
پایین پا	۶۰۰ برای هر طرف	۲۵-۳۰ برای هر طرف

تعداد پالس‌ها و زمان‌ها تقریبی هستند

توجه: فن خنک کننده‌ی دستگاه ممکن است در طی درمان خاموش و روشن شود. این امری طبیعی است و نگران آن نباشید.

مراقبت از لیزر تریا 4X

لیزر تریا 4X به مراقبت ویژه‌ای نیاز ندارد، اما توصیه می‌کنیم که آنرا به ویژه در پیچه درمان و حسگر پوست را تمیز نگه دارید.

دستورالعمل تمیز کردن

مطمئن باشید که لیزر تریا 4X خاموش است و شارژر باتری از دستگاه و پریز برق جداست.

لیزر تریا 4X و شارژر باتری را با یک دستمال نرم مرطوب و صابون تمیز کنید و روی در پیچه درمان و سایر قسمت‌های دستگاه بکشید. مراقب باشید که در پیچه درمان آسیب نبیند. اجازه دهید که دستگاه قبل از شارژ کردن و یا روشن نمودن به صورت کامل خشک شود.

برای تمیز کردن حسگر پوست که در زیر لیزر تریا 4X قرار دارد از دستمال خشکی که پرز نمی‌دهد استفاده کنید.

عدم استفاده‌ی درازمدت

اگر برای مدت طولانی برنامه‌ای برای استفاده از دستگاه ندارید، توصیه می‌کنیم هر سه ماه یکبار وسیله را شارژ کنید تا باتری سالم بماند.

هشدار:

شارژر باتری یا دستگاه لیزر تریا 4X را خیس یا مرطوب نکنید و اگر خیس شد از آنها استفاده نکنید. کار با دستگاه خیس موجب شوک الکتریکی خواهد شد.

قرار دادن افقی دستگاه خانگی لیزر تریا 4X یا پوشاندن دستگاه با هر گونه پارچه یا حائلی موجب انسداد در پیچه تهویه دستگاه می‌شود. در نتیجه هوای خنک درون فن دستگاه به درستی به جریان نمی‌یابد و عملکرد دستگاه با مشکل مواجه می‌شود که در نهایت به از کار افتادن دستگاه لیزر شما منجر می‌شود. لذا از پوشاندن در پیچه تهویه دستگاه به هر نحوی خودداری نمایید و دستگاه را تنها در حالت عمودی روی پایه‌ی آن قرار دهید.

به علاوه همانند تمامی دستگاه های لیزر کلینیکی، مکانیسم لیزر خانگی تریا 4X نیز ایجاب می‌کند که در هوای خنک نگهداری شود تا بتواند به درستی عمل کند و در سیستم گردش هوای درون دستگاه اختلالی ایجاد نشود. بنابراین اکیدا توصیه می‌شود دستگاه خود را در محیط‌های خنک نگهداری نمایید.

رفع مشکلات احتمالی

برای راهنمایی بیشتر با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

پرسش شما	ممکن است که...	چطور حل کنیم
لیزر تریا 4X روشن نمی‌شود	لیزر تریا 4X شارژ نیست	لیزر تریا 4X را شارژ کنید.
وقتی که لیزر تریا 4X را شارژ می‌کنم، نشانگر باتری نشان می‌دهد که شارژ کامل نیست.	لیزر تریا بطور کامل به برق متصل نمی‌باشد.	مطمئن شوید که لیزر تریا بطور کامل به شارژر و برق خروجی وصل است.
حتی پس از شارژ لیزر تریا 4X نشانگر باتری هنوز در حال شارژ شدن را نشان می‌دهد.	لیزر تریا بطور کامل شارژ شده و آماده استفاده است.	شارژر را از برق و از لیزر تریا جدا کنید.
لیزر تریا هنوز بطور کامل شارژ نشده است.	لیزر تریا هنوز بطور کامل شارژ نشده است.	لیزر تریا را شارژ کنید.

پرسش شما	ممکن است که...	چطور حل کنیم
هنگامی که لیزر تریا 4X را روی پوست می گذارم هیچ اتفاقی نمی افتد.	لیزر تریا قفل شده است	هنگامی که لیزر تریا 4X کار نکند قفل می شود، قفل لیزر را با حسگر پوست باز کنید.
	لیزر تریا به شارژر وصل است.	هنگامی که لیزر تریا 4X به شارژر وصل است کار نمی کند. آنرا از شارژر جدا کنید.
	سر دستگاه به صورت کامل در تماس با پوستتان نیست.	مطمئن شوید که سر دستگاه بصورت کامل روی پوستتان قرار دارد.
	منطقه ای که می خواهید درمان کنید بسیار کوچک، خمیده یا استخوانی است.	دوباره امتحان کنید، سطح پوست را بکشید، اگر می توانید همه سطح دریچه درمان را روی پوست قرار دهید، در غیر اینصورت لیزر تریا نمی تواند در آن منطقه کار کند.

پرسش شما	ممکن است که...	چطور حل کنیم
نمی توانم از لیزر تریا استفاده کنم و علامت قفل روی نمایشگر دیده می شود.	لیزر تریا 4X شما قفل می باشد.	اگر از لیزر تریا استفاده نشود، دستگاه قفل می شود. قفل آن را با لمس حسگر پوست باز کنید.
نمایشگر به سرعت فلاش می زند.	لیزر تریا 4X بخوبی کار نمی کند.	با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
خاک و لکه دریچه ای درمان را مسدود کرده است.	لیزر تریا 4X باید تمیز شود.	دستورالعمل تمیز کردن را ببینید یا با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
من سعی کردم قفل لیزر تریا را باز کنم اما دستگاه هنوز قفل است.	ممکن است استفاده از لیزر تریا برای شما ایمن و مناسب نباشد.	رنگ پوست خود را با نمودار رنگ های پوستی داخل دفترچه راهنما مطابقت دهید یا با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
	حسگر پوست را بدرستی استفاده نکرده اید.	دوباره سعی کنید حسگر پوست را بطور کامل و مسطح روی پوست نگه دارید.

مشخصات فنی دستگاه

نوع لیزر: لیزر دایود

کلاس لیزر: لیزر کلاس یک

طول موج خروجی: ۸۱۰ نانومتر

توان: ۷-۲۲ ژول در متر مربع

پرسش شما	ممکن است که...	چطور حل کنیم
زمانی که لیزر تریا را تغییر مکان می‌دهم به نظر می‌رسد زمان زیادی طول می‌کشد تا شات بعدی را بزند.	اتاق گرم است. پالس‌های لیزر تریا در اتاق گرم سرعت کمتری دارد.	لیزر تریا 4X را در محیط‌های خنک‌تری استفاده کنید.
لیزر تریا 4X خوب کار می‌کند اما ناگهان متوقف می‌شود. نمایشگر خاموش می‌شود و با زدن دکمه پاور روشن نمی‌شود.	باتری دستگاه نیاز به شارژ شدن دارد.	لیزر تریا 4X را شارژ کنید.
هنگام کار با لیزر تریا صدای فن را می‌شنوم.	طبیعی است.	به درمان ادامه دهید.

